

OTTIMO RAPPORTO
QUALITA' PREZZO

MiniLITE Plus




MiniLITE Plus è un apparecchio innovativo per elettroforesi veterinaria. Particolarmente affidabile con poco ingombro, bassi consumi di reagenti e di energia.

La semplicità d'uso è comune ai 2 differenti livelli di automazione progettati in diverse versioni per ottimizzare le prestazioni mantenendo bassi i costi di gestione.

In tutte le versioni è presente il sistema automatico di lavaggio e asciugatura dell'applicatore dei sieri e caricamento automatico dei reagenti, con sensori di livello ottici.

È collegabile a Internet per un totale controllo a distanza (Remote Service).

Codice strumento
MINI1

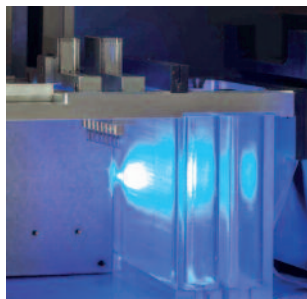

Caratteristiche Tecniche

Tipo di strisce	Strisce da 4 campioni o 8 campioni
Tipo di analisi	Sieroproteine (Emoglobina, Lipoproteine)
Supporto utilizzato	Acetato di cellulosa supportato su Mylar
Capacità analitica	Da 1 a 8 campioni micro
Tipo di tecnica	Micro
Inserimento campioni	Piastra portacampioni lavabile
Sistema di lettura	Canali indipendenti 8 fotodiodi
Sorgente luminosa	8 led ultraluminosi
Controllo livelli liquidi	Nelle vaschette interne con sensori
Interfaccia	USB rete LAN per collegamento remoto
Alimentazione	220 - 240Vac 50-60 Hz
Dimensioni	37 x 36 x 36 (LPH)
Software	Collegamento da remoto per ass. tecnica via software e gestione metodiche modificabili

Codice accessori Kit

MINI2	KIT DA 400 TEST
MINI3	KIT DA 200 TEST
MINI4	KIT DA 100 TEST

