

Smart-V5-Retic


Contaglobuli automatico con doppia tecnologia, Impedenziometrica e Laser,

per la determinazione della formula leucocitaria in percentuale ed in valore assoluto 5 part-Diff e RETICOLOCITI.

Lo strumento ha la possibilità di visualizzare e stampare 2 istogrammi di RBC e PLT, 2 scattering WBC 5 part-Diff e 2 scattering Retic.

Software veterinario per la determinazione di 13 specie.

La misurazione dei RETICOLOCITI avviene tramite provette con specifico reattivo.

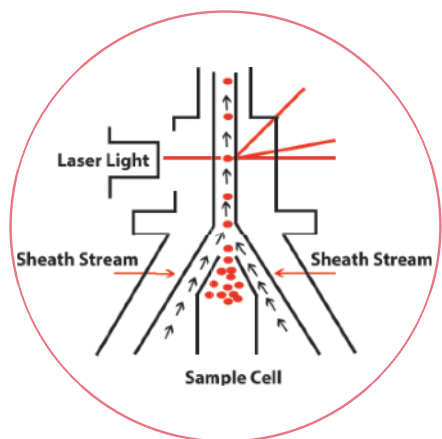

- Tecnologia Laser Multi-Dimensional Cell Classification
- Assenza di colorante chimico, Cianide-free
- Segnale cellulare morfologico originale

Caratteristiche Tecniche

Tempo di lettura	60 sec.
Capacità analitica	60 test/ora
Volume campione	20 microlitri di sangue intero, EDTA K3
Parametri	WBC - LYM %% - MON %% - EOS %% - BASO %% - RBC - HGB - HCT - MCV - MCH - MCHC - RDW CV - RDW SD - PLT - MPV - PDW - PCT - P LCC - P LCR - RET % - RET ABS - IRF - NRBC %% - LIC %% - ALY %%
Interfaccia	LAN, USB, Serial Port
Display	Touch Screen 10,4 inch color graphic LCD
Tensione di rete	110/230 VCA 50-60 HZ 900 VA
Dimensioni	315x275x370 mm
Peso	13 kg



Codice strumento Smart-1