

Ematologia

H60 Vet

Contaglobuli automatico

NEW

5 part-diff Laser per la determinazione di 25 parametri,

2 istogrammi RBC/PLT, 2 scattering WBC 5 part-diff, segnalazione di grandi cellule immature e linfociti anormali.

Software veterinario per la determinazione di diverse specie animali.


Ciclo di lavaggio estremamente ridotto e richiesto ogni 200 campioni.

Stampa referti su printer formato A4.

Software in lingua italiana.



Codice strumento
H60 Vet1

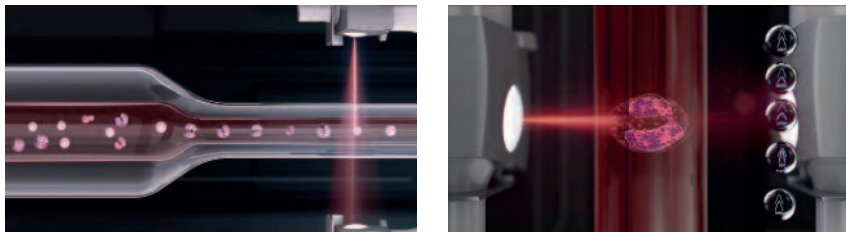

Doppia tecnologia, Impedenziometrica e Laser a doppio angolo con citometria a flusso per ottenere la migliore differenziazione della formula leucocitaria. Lisante Cianide Free

<p>5-PART DIFF</p> <p>10 DIFF parameters 2 scattergrams</p> <p>Chiare definizioni delle sottopopolazioni leucocitarie.</p> <p>DIFF BASO</p>	<p>LIC</p> <p>Flag grandi cellule immature</p> <p>In caso di probabile polmonite, l'emolisi LIC potrebbe essere un indicatore.</p> <p>LIC</p>	<p>ALY</p> <p>Flag linfociti anormali</p> <p>ALY indicatore allergia di parassitizzazione.</p> <p>Abn-Lym</p>	<p>EOSINOFILIA</p> <p>Alta specificità per eosinofili</p> <p>Eos</p>
--	--	--	---

Parametri misurati

LO STRUMENTO PUO' EFFETTUARE I SEGUENTI PROFILI SU: CANE, GATTO, CAVALLO*, SCIMMIA*, TOPO*, MAIALE*, CAPRA*, CONIGLIO*

25 parametri: WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, RDW-CV, RDW-SD, MCH, MCHC,PLT, MPV, PCT, PDW, PLCR, PLCC, LYM%, LYM#, MON%, MON#, NEU%, NEU#, EOS%, EOS#, BAS%, BAS#.

6 parametri FLAGS: ALY#, ALY%, LIC#, LIC%, NLR, PLR.

2 istogrammi: RBC, PLT

2 scattergrammi: WBC DIFF, BASO

*** Di prossima introduzione**

Caratteristiche Tecniche

Capacità analitica	60 test/ora
Modalità sangue intero	16 microlitri
Modalità prediluita	20 microlitri
Display	Touch Screen a colori, TFT da 12,1 pollici
Temperatura	15°C~32°C
Umidità	30% RH~85% RH
Pressione dell'aria	70 kPa~106 kPa
Dimensioni	501x320x502,5 mm
Peso	29,3 kg

Codici reagenti

H60 DILUENT10	Diluent 10 litri - H60 Vet
H60 DILUENT	Diluent 20 litri - H60 Vet
H60 LYSE	Lyse 200 ml. - H60 Vet
BH6	Probe Cleaner 200 ml. - H60 Vet
H60 LYSE	Lyse H60 Vet - 4x200 ml.