


duemilaventisei
2 0 2 6

CATALOGO
CATALOGO
CATALOGO
CATALOGO
CATALOGO



Partner della Veterinaria

Il valore della diagnostica

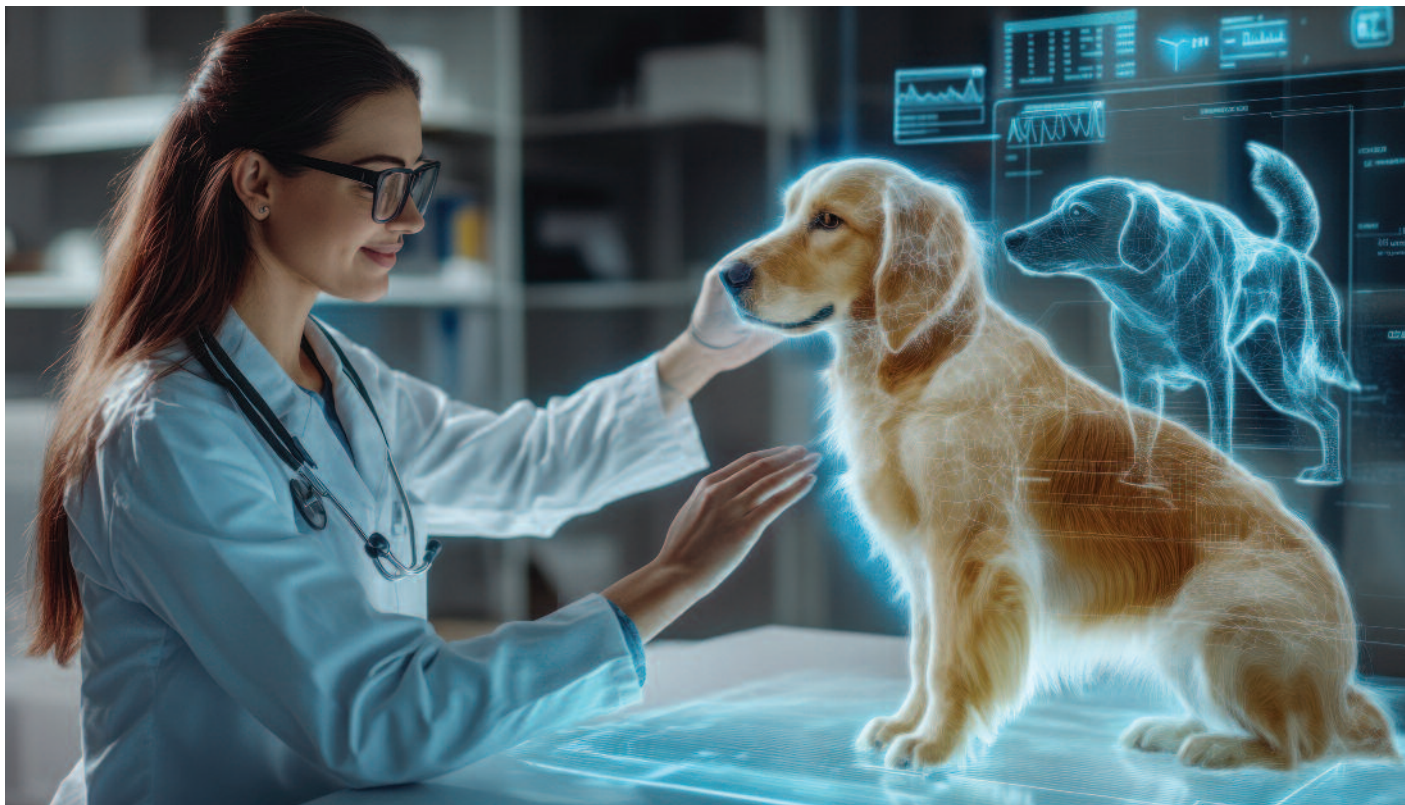

ISOMEDIC: Anticipare oggi i bisogni della veterinaria di domani

ISOMEDIC è un'azienda specializzata in diagnostica per immagini e di laboratorio, che opera con passione e competenza al servizio del medico veterinario. Il nostro impegno è fornire strumenti all'avanguardia, consulenza specializzata e un'assistenza tecnica di alto livello, per trasformare ogni diagnosi in un'azione precisa, efficace e tempestiva.

La nostra missione è chiara: trasformare la tecnologia in valore clinico, offrendo soluzioni che migliorano la precisione diagnostica e la qualità della cura animale.

Tecnologia, ricerca e partnership d'eccellenza

Produciamo apparecchiature radiologiche e distribuiamo in esclusiva per l'Italia alcuni tra i marchi internazionali più prestigiosi del settore diagnostico. Ogni prodotto è selezionato per performance, affidabilità e qualità costruttiva, garantendo risultati costanti nel tempo.

Tra i nostri progetti più innovativi spiccano:

- Mercu, il nostro sistema digitale dinamico per radiologia veterinaria, pensato per portare la diagnostica d'immagine a un nuovo livello di efficienza e versatilità. Mercu unisce qualità d'immagine superiore, rapidità di acquisizione e un'interfaccia intuitiva, rendendo l'esperienza del professionista più fluida e produttiva.
- AI-100Vet Elite, l'analizzatore morfologico multifunzionale che integra l'intelligenza artificiale per l'analisi automatica di sangue, urine, feci e versamenti. Una tecnologia unica, capace di supportare il veterinario con referti completi, affidabili e immediati.

Soluzioni su misura e assistenza capillare

Ogni struttura veterinaria ha esigenze specifiche.

Per questo ISOMEDIC costruisce soluzioni personalizzate, accompagnando il cliente in ogni fase: dall'analisi iniziale, alla scelta delle apparecchiature, fino all'installazione e al supporto post-vendita.

Grazie a una rete capillare di tecnici specializzati su tutto il territorio nazionale, garantiamo interventi rapidi, competenti e costanti nel tempo.

Innovare per il futuro della veterinaria

L'innovazione è la nostra direzione. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo, collaborando con università, partner tecnologici e cliniche veterinarie per anticipare i bisogni della professione.

Questa la nostra visione: rendere ogni diagnosi più sicura, ogni decisione più consapevole e ogni cura più efficace.

Un partner affidabile, oggi e domani

Scegliere ISOMEDIC significa scegliere qualità, continuità e innovazione.

Significa contare su un partner che guarda al futuro della veterinaria con competenza, responsabilità e passione.

INDICE GENERALE

DIAGNOSTICA PER IMMAGINE

Flat Panel Mercu 1717V3 Dynamic	4-5
Flat Panel Mars 1717X wired/wireless	6
Flat Panel Venu 1717X	7
IONA-FPD 4343E CSI Cassette Size	8
Software DXRS vet	9
RT 800 mA (App. Radiografico Touch Screen)	10
Plenus 500 HF (App. Radiografico Touch Screen)	11

DIAGNOSTICA DI LABORATORIO

Skyla Tutti (Analizzatore Universale Veterinario)	14-15
Skyla Solution (VET dry Chemistry Analyzer)	16-17
Skyla VB1 Plus (VET dry Chemistry Analyzer)	18-19
SPHERA (Analizzatore automatico multifunzione per Chimica Clinica Liquida)	20
PULSAR (Analizzatore automatico multifunzione per Chimica Clinica Liquida)	21
AI-100Vet Elite (Analizzatore morfologico multifunzione)	22-23-24
AI-80 Vet (Analizzatore morfologico)	25-26
DM-03 (Microscopio Awalife)	27-28
H60 Vet (Contaglobuli automatico 5 part-diff)	29
Coatron X Pro (Coagulometro semiautomatico bicanale)	30
Misuratore di pressione	30
QLabs Coag Vet (Coagulometro portatile a batteria)	31
eStation II for qLabs Vet	31
I-15 VET (Emogasanalizzatore Portatile)	32
Serie GEM Premier 5000 (Emogasanalizzatore da banco)	33
Vcheck V200	34-35
Vcheck M	36-37
UC-32B Vet (Analizzatore di urine)	38
BELUA (Misuratore di Glicemia e Ketoni Vet)	38
ISOLABLINK (Software Gestionale)	39

LINEA TEST RAPIDI

Test Rapidi	42-43-44-45-46
RapidBac™ Vet 2.0 (Test di screening per i batteri nelle urine)	46

MATERIALE DI LABORATORIO

Centrifughe - Mixer	50
---------------------	----

MATERIALE DI CHIRURGIA

Concentratore di Ossigeno	50
---------------------------	----

MATERIALE DI RADIOLOGIA

Abbigliamento protettivo - Accessori	50
--------------------------------------	----

CONDIZIONI GENERALI

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA	52
--------------------------------	----



Diagnostica per
Immagine


Mercu 1717V3 Dynamic

Radiologia diretta + fluoroscopia 2 tecniche in un sistema

Mercu 1717V3 Dynamic è un FPD a-Si progettato per l'imaging in tempo reale.

Il sensore di immagine da 17×17 pollici è a deposizione diretta Csl, che fornisce un eccellente imaging a bassa dose con frame rate fino a 30 fps.

Se integrato con un sistema fluoroscopico a raggi X, può essere utilizzato in radiografia generale, fluoroscopia e CBCT per applicazioni gastrointestinali, urologiche e muscolo scheletriche.

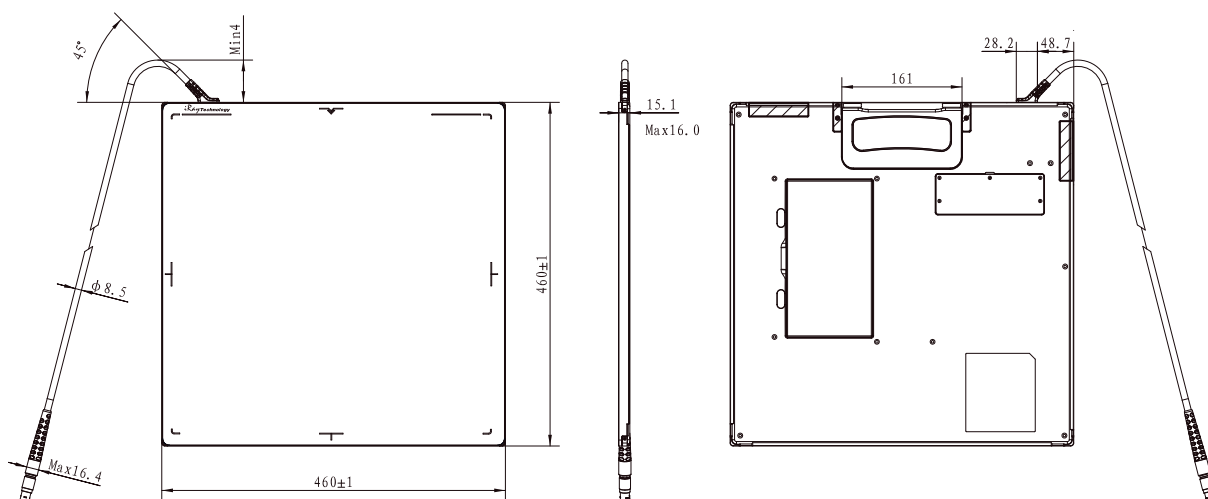

Caratteristiche tecniche

Tecnologia del rilevatore	Amorphous Silicon
Scintillatore	Csl
Area attiva	43 x 43 cm
Matrice di pixel	3072 x 3072
Dimensione pixel	139 μm
Risoluzione spaziale	Lp/mm: 3.6
Conversione AD	16 bits
Frequenza fps (fotogrammi al secondo)	5 (1 x 1) 20 (2 x 2) 30 (3 x 3)
Interfaccia dati	GigE
Dimensioni	460 x 460 x 16 mm ³
Peso	≈ 4 kg
Dissipazione di potenza	≤ 25 W
Temperatura di esercizio	10 ~ 40 (°C)
Temperatura di stoccaggio e trasporto con confezione	20 ~ 90 (°C)
Umidità operativa	-10 ~ 55 (% RH)
Umidità di stoccaggio e trasporto con l'imballaggio (senza condensa)	10 ~ 95 (% RH)

Specifiche tecniche

- Design a cassetta
- Dose clinica estremamente bassa con DQE elevato
- Meno del 2,5% di ritardo del primo fotogramma
- Impostazioni commutabili per un setup variabile
- Alta velocità di trasmissione: 5 fps a piena risoluzione
- 20 fps in 2×2 • 30 fps in 3×3


PC / WORK STATION

- Cabinet ATX SHARKOON M25-V (Advanced Technology Extended: uno standard progettato per garantire la compatibilità tra tutti i componenti)
- Alimentatore Coolmaster ATX 1050 W
- Due Hard Disk da 2 TB
- Memoria RAM 32GB 5200 Mhz
- CPU INTEL i9 -12700K/12900K/13900K
- Monitor Medicale + Monitor HD TOUCH SCREEN
- Masterizzatore DVD

DXRS Vet Dynamic

Nuove diagnosi oltre le immagini

Il software di controllo DXRS Vet permette all'operatore di snellire ed agevolare le fasi dell'intera diagnostica radiografica e garantisce moltissimi vantaggi:

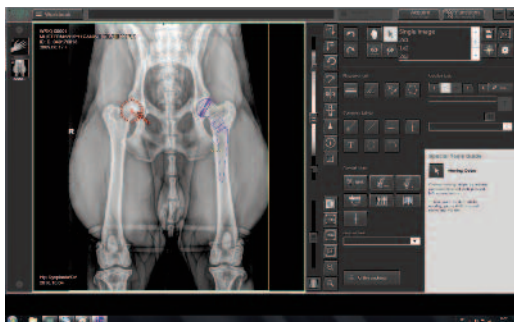

- Proiezioni completamente modificabili e memorizzabili in base alle esigenze e preferenze dell'operatore
- Acquisizione in grafia continua (RX consecutive) senza dover lasciare il paziente
- Archiviazione e memorizzazione in un unico database
- Editing scopie
- Esportazione video
- Service on-line



video 1

La radiologia digitale si è evoluta

Metodica per lo studio della motilità esofagea

Il **video 1** mostra un cane di piccola taglia affetto da rigurgito e polmoniti ab ingestis ricorrenti. La radiologia dinamica mostra la persistenza del mezzo di contrasto a livello della porzione caudale dell'esofago dovuta ad una insufficienza dell'inda longitudinale primaria. Una Miastenia Gravis è stata confermata e tenuta sotto controllo con ottimi risultati vista la diagnosi precoce.



Diagnosi di versamento pericardico

Il **video 2** mostra questo concetto.

In caso di versamento pericardico, il cuore si muove all'interno del sacco pericardico che appare statico e quindi molto meglio definito.

Basta avere il paziente a sfinge o in piedi sul tavolo radiologico e la diagnosi è fatta!



video 2



video 3

Diagnosi e visualizzazione in emergenza della presenza di alterazioni della cinetica cardiaca

In un'ottica di urgenza, la valutazione dei movimenti cardiaci ci permette di confermare una aritmia semplicemente valutando il movimento delle camere cardiache. Ovvio che uno studio elettrocardiografico dovrà poi classificarla per poterla trattare. Questa metodica permette anche di valutare una cinetica cardiaca debole o rallentata, come evidente in questo **video 3**.



I motivi per scegliere Mercuri 1717V3 Dynamic

1. Riduzione delle Dosi di Radiazioni

Uno dei vantaggi chiave dei rivelatori dinamici è la capacità di ridurre le dosi di radiazioni necessarie per ottenere immagini diagnostiche di alta qualità.

La maggiore sensibilità dei rivelatori dinamici consente una migliore cattura delle radiazioni, contribuendo a proteggere i pazienti e i medici da eccessive esposizioni.

2. Qualità delle Immagini e Diagnosi

I rivelatori dinamici offrono immagini radiografiche di alta qualità, consentendo una diagnosi più accurata delle condizioni patologiche dei pazienti evidenziando lesioni subdole.

3. Acquisizione Rapida delle Immagini

La capacità di acquisizione rapida delle immagini è fondamentale in situazioni di emergenza o quando si trattano pazienti poco collaborativi e agitati.

I rivelatori dinamici consentono tempi di esposizione più brevi, riducendo lo stress.

4. Immagine Dinamica e Monitoraggio


Alcuni rivelatori dinamici permettono la registrazione di sequenze di immagini in tempo reale, consentendo il monitoraggio di processi dinamici come il movimento degli organi interni o la funzione articolare.

Eccellente qualità d'immagine, wired/wireless

Il sistema Flat Panel Mars 1717X è un detettore digitale con **100 μm** (pixel pitch) al Cesio (Csi).

Le tecnologie innovative includono un nuovo design con grado di protezione d'ingresso IP56, ricarica della batteria nell'apposito alloggiamento con rilevamento automatico dell'esposizione (AED) a bassa potenza.

Con la sua eccezionale qualità dell'immagine, il Mars 1717X è una scelta eccellente per i sistemi DR di fascia alta.

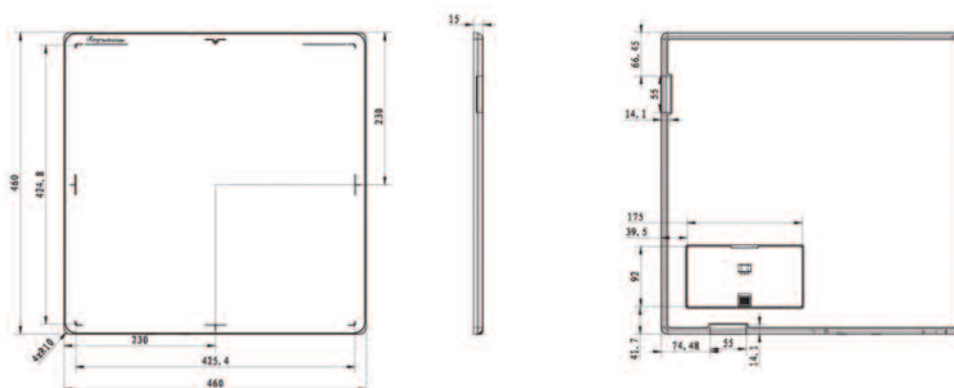

Caratteristiche tecniche

Tecnologia Detettore	Amorphous Silicon
Scintillatore	Csi
Area attiva	17 x 17 cm
N. pixel	4267 x 4267
Pixel Pitch	100 μm
Risoluzione	Lp/mm: 4.3
AD Conversion	16 bits
Batteria di autonomia	8 h
WiFi	2.4G e 5G, IEEE802.11 a/b/g/n/ac
Modalità trigger	DAE (opzionale) software
Preview image	3s
Dimensioni	460 x 460 x 15 mm
Peso	3,4 Kg
Protezione dell'ingresso	IP56
Temperatura di operazione	10 ~ 35 (°C)

Perchè scegliere Mars 1717X wired/wireless


- Rivelatore di cassette wireless secondo ISO 4090, si inserisce in bucky
- Controllo completo dell'AED, esposizione in qualsiasi momento
- Eccellente qualità d'immagine con 100 μm (pixel pitch), ADC 16 bit
- Durata della batteria di 8 ore
- Design leggero con protezione di ingresso IP56
- Supporta un flusso di lavoro veloce per una migliore esperienza utente

Immagina il futuro

Il sistema Flat Panel Venu 1717X CASSETTE SIZE è un detettore digitale Cesium CsI. Le sue caratteristiche tecniche lo qualificano per applicazioni di alto livello.

AED: AUTOMATIC EXPOSURE DETECTION

Riconoscimento automatico della dose erogata dal generatore x-ray.
Non necessita di sincronizzazione e collegamenti con cavo.

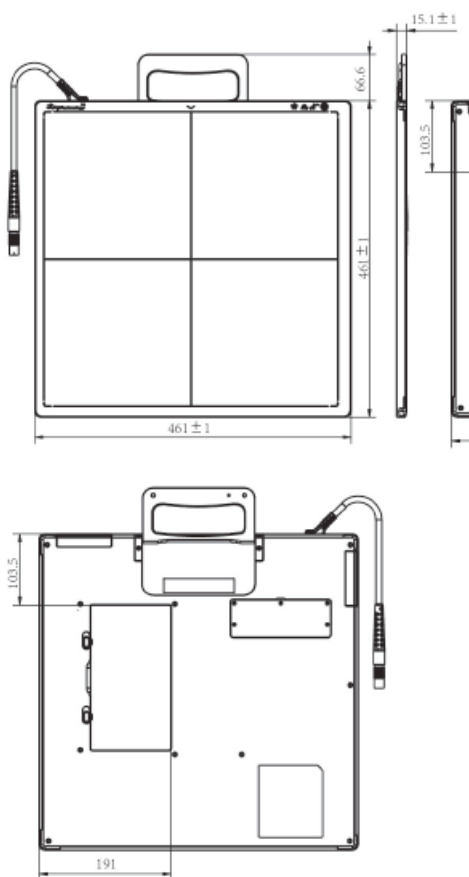

Caratteristiche tecniche

Tecnologia Detettore	Amorphous Silicon
Scintillatore	CsI
Area attiva	43 x 43 cm
Pixel Pitch	139 μ m
N. pixel	3072 x 3072
Risoluzione	Lp/mm: 3,6
AD Conversion	16 bits
Preview image	3s
Temperatura di operazione	5 ~ 35 °C
Dimensioni	460 × 460 × 15 mm
Consumo di alimentazione	Max. 25 W
Peso	4,0 Kg



Perchè scegliere Venu 1717X

- Design super leggero
- Flusso di lavoro rapido ed efficiente
- Superiore qualità dell'immagine con basso dosaggio
- Livello di protezione IP54

IONA-FPD 4343E CSI CASSETTE SIZE

Il sistema Flat Panel IONA-FPD 4343E CSI wired, è stato sviluppato per soddisfare i requisiti più esigenti con un'alta qualità d'immagine e risoluzione.

DR Sistema
Digitale Diretto

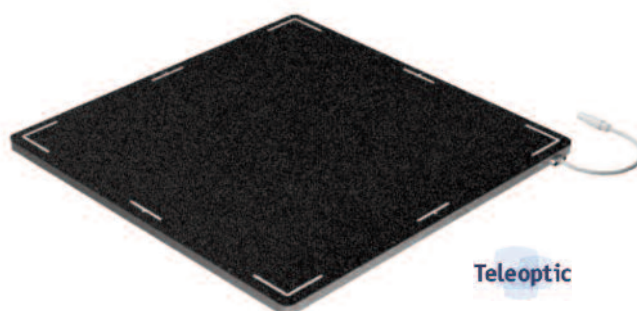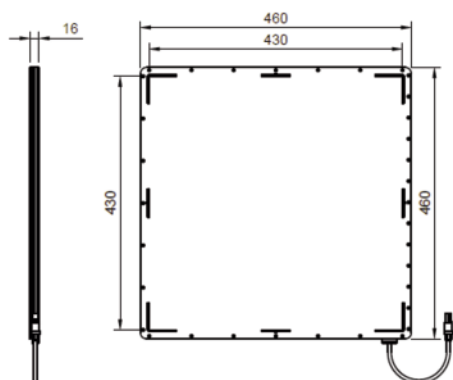

Caratteristiche tecniche

Tecnologia detettore	Flat Panel DR
Dimensione immagine	43x43 cm
Scintillatore	CSI
Rilevamento automatico dell'esposizione ai raggi X (DAE)	Integrato
Sincronizzazione esterna	Opzionale
Interfaccia dati	Gigabit Ethernet
Pixel matrix	3072x3072
Pixel area	140 μ m
Spatial Resolution	3.6 LP/mm
Dimensioni	46 x 46 x 16 cm
Gamma di energie dei raggi X	40-150 kVp
Peso	< 4 kg
Potenza	POE, 18-56V, 50W max

Perchè scegliere IONA-FPD 4343E CSI wired

PORTATILE: ultra slim, ultra leggero, resistente al versamento di liquidi.

AFFIDABILE: adatto agli ambienti più difficili, soddisfa i più rigorosi requisiti medici, protocollo di comunicazione super affidabile.

DUREVOLE: remote service.

AED: risposta veloce, alta qualità d'immagine, innovativa tecnologia.

La radiologia digitale si è evoluta

ISOMEDIC, dal 2007 è leader di mercato in Italia nella diagnostica da laboratorio e radiologia veterinaria.

Nata dall'esperienza trentennale x-ray —, ISOMEDIC è una delle poche aziende che può vantare un assortimento completo di soluzioni specifiche per la radiologia veterinaria.

Dalle unità per i piccoli e grandi animali, alle apparecchiature con tecnologie ad alta frequenza, fino ai nuovi sistemi per la radiografia digitale, ISOMEDIC soddisfa qualunque esigenza di mercato e di budget, garantendo sempre il massimo della tecnologia e delle prestazioni in una logica di qualità totale.

Nel segmento radiologico digitale, ISOMEDIC è la prima azienda italiana ad aver introdotto in ambito veterinario i sistemi di radiologia digitale diretta.

Caratteristica di tutti i sistemi digitali DR di ISOMEDIC è l'esclusivo software di controllo DXRS sviluppato da ISOMEDIC, con specifico know-how nelle soluzioni medicali di radiologia digitale.

Dal 2008 ISOMEDIC conta diverse centinaia di sistemi digitali installati in tutta Italia che rappresentano oggi l'investimento irrinunciabile per prestazioni, velocità, risparmio economico ed ecosostenibilità.

Il software di controllo DXRS di ISOMEDIC permette all'operatore di snellire ed agevolare le fasi dell'intera diagnostica radiografica e garantisce moltissimi vantaggi:



- Infiniti settaggi per ogni singola parte anatomica.
- Proiezioni completamente modificabili e memorizzabili in base alle esigenze e preferenze dell'operatore.
- Acquisizione in Grafia continua.
Questo permette di non lasciare incustodito il paziente nel caso ci fosse la necessità di ulteriori indagini diagnostiche, ed è ideale per gli studi ortopedici come Displasie, Esami con mezzi di contrasto, Mielografie ecc.

Work Station

- Processore i5 - i7
- RAM 8 GB
- Due Hard da 1 TB
- Scheda video dedicata - 4 GB - 1920 x 1200 pixels
- Sistema operativo: Windows 10 PRO 64 bit
- Masterizzatore CD/DVD
- Monitor Medico DICOM 22" risoluzione 1920x1200
- Possibilità di aggiunta 2° monitor (Medico e non)
- Service on-line
(assistenza remota tramite connessione Adsl)
- Possibilità di comunicazione con software gestionali.
Grazie ai protocolli standard SCU/SCP è possibile la ricezione automatica dei dati anagrafici del paziente e proprietario e l'invio in rete delle immagini ottenute.
- Salvataggio delle immagini su supporti removibili come CD, DVD e USB-pen o archivi NAS.
- Creazione Report e Refertazione
- Suite RIA Dicom Viewer per effettuare misurazioni e comparazioni multi-immagine.
- **Modelli ortopedici precaricati per simulazioni pre-operatorie.**

Richiedete oggi stesso una dimostrazione del software di controllo DXRS e scoprite le soluzioni radiologiche di ISOMEDIC a misura della vostra realtà.

Sistemi di radiologia digitale veterinaria ISOMEDIC con software di controllo DXRS: la radiologia digitale si è evoluta.

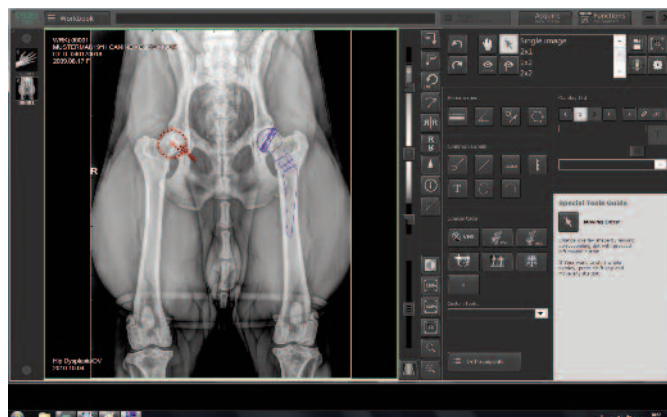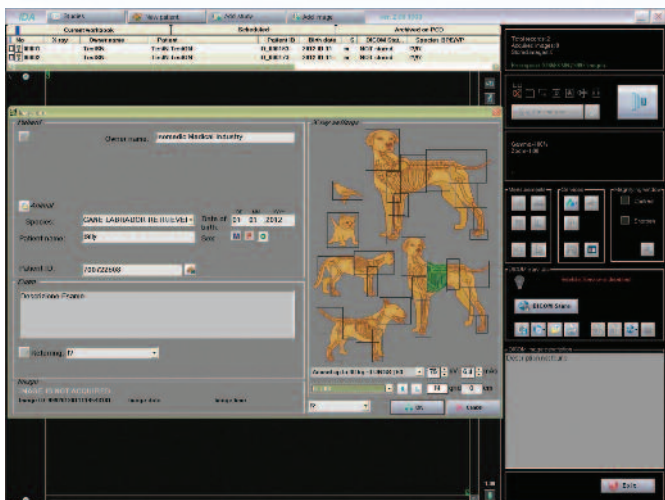

Apparecchio Radiografico Touch Screen

Abbinato ai nostri sistemi digitali DR - DFP raggiunge elevatissimi risultati in diagnostica d'immagine, impostazione diretta dei parametri radiologici tramite work station.

L'apparecchiatura radiografica è composta da struttura in lamiera elettrosaldata verniciata a polvere.

L'apparecchio radiografico RT 800 mA richiede una alimentazione di rete 400 V Trifase.

MANUALE

L'operatore sceglie i parametri a seconda delle necessità.

ANATOMICO

L'operatore seleziona la parte anatomica prescelta da tabella.

L'apparecchiatura radiografica è completa di griglia.



Modo operativo 2 punti o 3 punti selezionabile da software

- **Possibilità di utilizzo in scopia e scopia pulsata (per connessione pannello dinamico)**
- **Collimatore modello: Ralco R302 A**



Caratteristiche tecniche	RT 800 HF 65 kW
Tensione di rete:	400 V Trifase 50 Hz
Potenza massima assorbita:	Apparente 117 kVA / Attiva 87 kW
Tensione e corrente al tubo:	800 mA @ 81 kV / 630 mA @ 103 kV 500 mA @ 130 kV / 400 mA @ 150 kV
Tecnica radiografica:	1, 2, 3, 4 punti
Potenza:	65 kW
Cuffia:	IAE C352 o equivalente
Tubo RX:	RTM 90 h fuochi 0,6-1,3
Centratore luminoso:	RALCO R 302
Dimensioni:	L 1500 mm - P 1090 mm - H 1980 mm
Generatore:	65 kW L 50 cm - P 36 cm - H 90 cm

ECCELLENTE PERFORMANCE QUALITATIVA

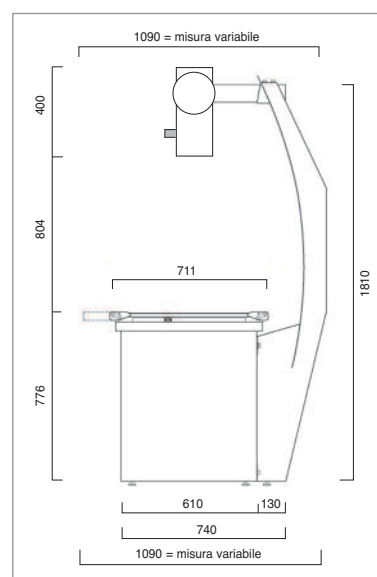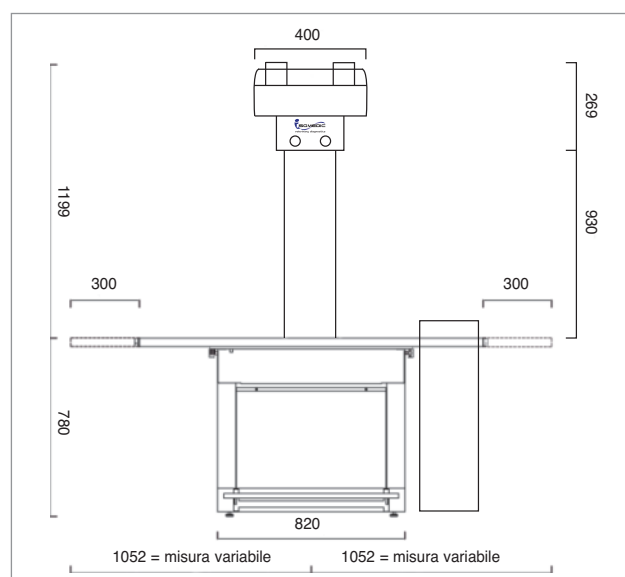

Plenus 500 HF

Ad alta frequenza
con predisposizione digitale



Radiologia Vet

Apparecchio Radiografico Touch Screen

Impostazione automatica della dose necessaria per esecuzione esame

generatore 32 kW, 125 KV, alimentazione 3 kW alta frequenza: 32-40 KHz

L'apparecchiatura radiografica è composta da struttura in lamiera elettrosaldata verniciata a polvere.

Generatore monoblocco e Rack di comando ad alta frequenza da 99 o 125 kV e 500 mA.

Tavolo radiografico a spostamento ortogonale movimentato su cuscinetti a sfera bloccato da freni meccanici.

Il funzionamento del sistema radiografico può essere:

MANUALE

L'operatore sceglie i parametri a seconda delle necessità

ANATOMICO

L'operatore seleziona la parte anatomica prescelta da tabella.

L'apparecchiatura radiografica è completa di griglia.

Modo operativo 2 punti o 3 punti selezionabile da software

Pannello di controllo

Alimentazione 230V 50 Hz monofase

Potenza impegnata 3 kW

Regolazione KV da 40 kV a 99 o 125 kV

Regolazione mAs da 1 a 320 mAs

Regolazione ms da 1 a 6300 ms


Pannello Touch Screen 10" TFT

Segnalazione software stato sistema

Memorizzazione in area dedicata di warning su livelli di password per analisi service

Dispositivo di sicurezza

- ✓ Controllo software che permette al tubo RX di lavorare sempre all'interno della curva di carico
- ✓ Indicatore visivo, presenza raggi e acustico dell'avvenuta radiografia
- ✓ Protezione inverter
- ✓ **Differenti livelli di password per accesso al sistema**

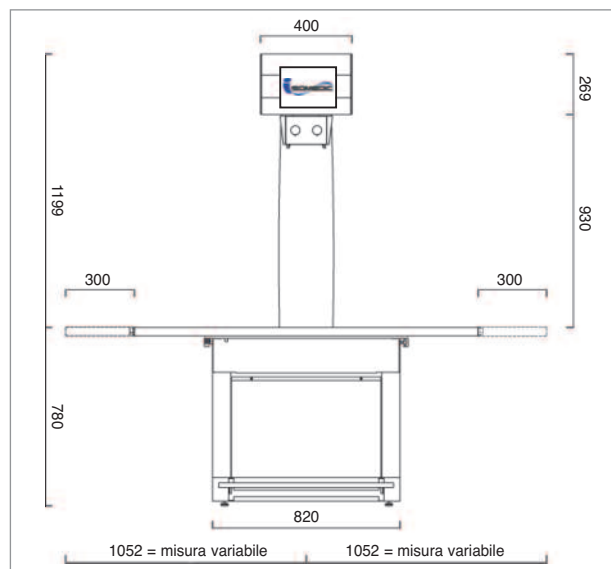

Monoblocco

Modello

Corrente max generatore
Potenza max generatore
Radiazione di fuga

Plenus 500 HF

500mA
32kV
inferiore ad 1 mGy/ora
in accordo a IEC 601-1-3


Tubo RX

Tipo
Fuoco
Valore max

Anodo rotante
0,6 / 1,3 mm
130 kV

Optional

- ✓ Lunghezza tavolo RX su richiesta, fino a 1,80 m
- ✓ Lampada di segnalazione esterna di presenza RX
- ✓ Lunghezza cavo pedale di comando

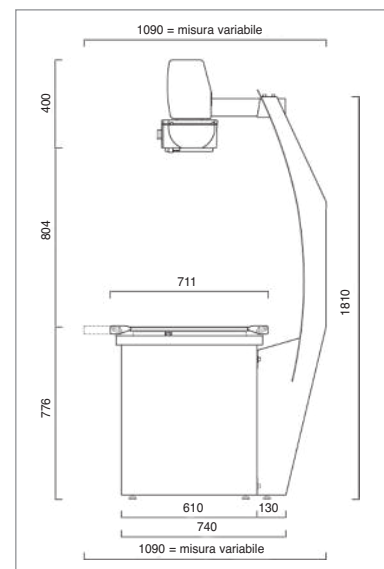

- **Collimatore modello: Ralco R104 A**



Diagnostica di
Laboratorio

Skyla Tutti*

Analizzatore Universale Veterinario

Il laboratorio automatico per la tua clinica

6-in-1: Biochimica, immunologia, coagulazione, urine, test rapidi e PCR**

La soluzione ideale per ottimizzare il tuo flusso di lavoro grazie al campionamento automatico con soli 60 μ l di plasma in 9 minuti.

Sistema iiE

Eliminazione intelligente delle interferenze.

Analisi LED multi-lunghezza d'onda.

Correzione dei big data.

Elimina LIP, HEM, ICT.



Codice strumento
SKYLA Tutti*



Database e app cloud

Gestione dati basata su cloud.
Collegamento in remoto.

Caratteristiche tecniche

Principio

Chimica

Immunanalisi

Coagulazione

Urine

PCR

Assorbanza, Colorimetrico con LED 340 nm ~ 700 nm

Turbidimetrico o ELISA con rivelazione fluorescenza

Coagulazione con sfera metallica, riconoscimento delle immagini

Rifrattometro

Amplificazione isoterica con rilevamento fluorescente

Dispositivo

Interfaccia:

8" TFT color LCD schermo tattile

Memoria:

Oltre 50.000 risultati cloud database

Dimensioni e Peso:

400 mm (H) x 264 mm (L) x 450 (P) - 12 kg

Connessioni:

USB 2.0, 4 porte (per chiavetta Wi-Fi, stampante, unità USB, scanner...), RS232, Ethernet (ASTM, HL7)

Stampante:

Termica incorporata/stampante esterna (supporta stampanti PCL3 GUI, PCL6)

Campioni

Tipo di campione e volume:

Sangue Intero, Siero o Plasma, Urine (dipende dal test selezionato)

Tempo di misurazione:

Chimica clinica: 9 ~ 12 min.

Immunoassay: 6 ~ 25 min. (dipende dal test selezionato)

Coagulazione: 8 min.

PCR con estrazione del DNA: 25 ~40 min. (dipende dal tipo di campione selezionato)

Condizione di funzionamento

Temperatura/Umidità:

5 - 35°C / 0 - 95%

*Di prossima introduzione

**Disponibile seconda metà dell'anno

Test disponibili

Biochimica

14 Profili

Basic Chem	Kidney
General Chem	Liver
Comprehensive Dx	Pancreattis
Optimum Wellness	Diabetes
Urgent Care	Electrolytes

Equine
Large Animal
Avian & Reptile
Exotic Pets

Test semplici

NH3
BUN+CREA
GLU+TP+ALB
GGT+TBIL:
AST+CK+LDH
ALP+ALT+AST
Ca+PHOS+Mg+ALB
AMY+P-LIPA
TRIG+CHOL+GLU

28 Test

ALB
ALP (ALKP)
ALT (GPT)
AMY (AMYL)
AST (GOT)
BUN (UREA)
Ca
CHOL (TC)
CK (CPK)
CREA (CRE)
CI
FRU (FRA)
GGT (μ -GT)
GLU
K
LAC
LDH
Mg
Na
NH3
PHOS
P-LIPA
TBA
TBIL
TCO2
TRIG (TG)
TP
URIC (UA)

Immunologia/ormonali/cardiaci

Canino

cCRP
PHBR
SDMA
TT4
cTSH
cPL
cHTpBNP
CTn-I
CORT
cPROG
Nu-H3.1
D-Dimer
...more

Felino

SAA
PHBR
SDMA
TT4
fPL
fNTpBNP
fCTn-I
CORT
Nu-H3.1
D-Dimer
...more

Equino

SAA

Coagulazione

PT, APTT, FIBR

Urine

USG (Urine SG by Refractometer)
UPC (Urine UPRO/UCRE ratio)
UmALB (Urine Microalbumin)
UCCR (Urine UCOR/UCREA ratio)
...more

PCR**

Vector Panel	Diarrhea Panel
Respiratory Panel	Neurologic Panel
Babesia type 2	Ehrlich-Anaplasma 2
IAV type	FCoV type (FIPV, FECV)
FIV-FelV2	...more

Test Rapidi

Dx4

Heartworm
Babesia
Anaplasma
Ehrlich

Dx4-L

Heartworm
Leishmania
Anaplasma
Ehrlich

FDx3

FIV
FeLV
Heartworm

Singolo Test

Lyme	CPV	Giardia
FCoV	CDV	...more

**Disponibile seconda metà dell'anno


Skyla Solution

Veterinary Dry Chemistry Analyzer
Chimica clinica secca

Analizzatore automatico biochimico

La soluzione ideale per analizzare 3 campioni contemporaneamente, sia per i test di chimica clinica che immunologici in un unico dispositivo per offrire la migliore efficienza, accuratezza e velocità dell'analisi veterinaria.

Applicare il campione in base al test da eseguire

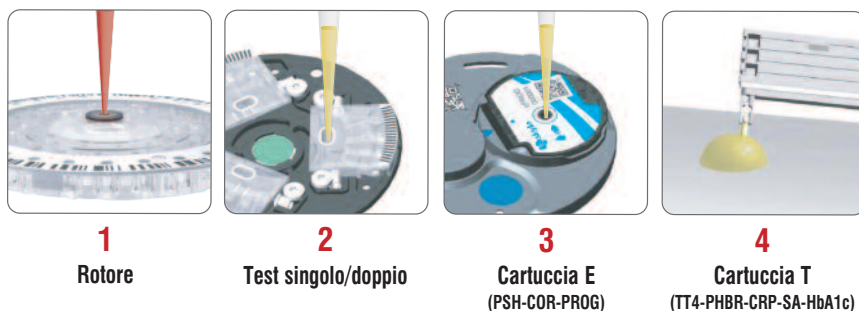

Avvia analisi e ottieni risultati

È possibile testare 3 campioni contemporaneamente, ciò permette di ridurre notevolmente i tempi di attesa, migliorando l'indice di soddisfazione sulla qualità medica.

Calibrazione e analisi completamente automatiche

Facile da usare poiché tutte le tarature, il controllo di qualità la diluizione, il monitoraggio delle reazioni e le misurazioni vengono eseguite automaticamente, il che riduce i tempi di formazione e il costo delle risorse.

Specifiche tecniche

- ✓ 3 campioni contemporaneamente
- ✓ Un immunodosaggio + due analisi chimiche
- ✓ Tutta la metodologia in un dispositivo
- ✓ Tecnica del chip microfluidico

Caratteristiche tecniche

Principio

Metodo: LED 340 nm ~ 940 nm
Turbidimetria, ELISA: Laser / LED 340 nm ~ 650 nm

Dispositivo

Interfaccia: Schermo tattile LCD a colori TFT da 8"
Memoria: Oltre 50.000 risultati
Dimensioni e Peso: 490 mm (H) x 230 mm (L) x 358 (P) - 12 kg
Stampante: Termica incorporata/stampante esterna (supporta stampanti PCL 3GUI, PCL5, PCL6)

Campioni e Reagenti

Tipo di campione e volume: **Sangue Intero, Siero o Plasma** 1-200 μ l (dipende dal test selezionato)
Tempo di misurazione: Rotore chimica clinica: fino a 18 test in 12 ~ 15 minuti;
Test singolo/doppio: fino a 6 test in 12 min.
Test immunologico: 6 ~ 25 minuti

Condizione di funzionamento

Temperatura/Umidità: 5 - 35°C / 0 - 95%



Codice strumento

Solution P21 Skyla Solution Analizzatore P21
(2 chemistry + 1 immune loader)

Solution P21.1 Skyla Solution Analizzatore P21.1
(3 chemistry drawers)

Solution P61 Skyla Solution Analizzatore P61
(2 chemistry)

Solution P11 Skyla Solution Analizzatore P11
(1 chemistry + 1 immune loader)

Skyla Solution

Codice	Rotori	Parametri	Confezioni
SKYLA4	Diagnostico Plus 18 parametri	ALP, ALT, BUN, CREA, GLU, ALB, UREA#, TP, TBIL, AMY, Ca, PHOS, Na, K, GLOB*, A/G*, B/C*, Na/K*	20 rotori
SKYLA5	Diagnostico 17 parametri	ALP, ALT, AST, BUN, CREA, GLU, ALB, TP, TBIL, AMY, Ca, PHOS, CHOL, GLOB*, A/G*, B/C*, UREA#	20 rotori
SKYLA6	Preanestetico 11 parametri	ALP, ALT, BUN, CREA, GLU, ALB, TP, GLOB*, A/G*, B/C*, UREA#	20 rotori
SKYLA7	Renale 13 parametri	Na, K, Cl ⁻ , Ca, PHOS, ALB, BUN, CREA, Na/K*, B/C*, tCO2, AGAP#, UREA#	20 rotori
SKYLA9	Diagnostico II 18 parametri	ALP, ALT, BUN, CREA, GLU, ALB, TP, TBIL, AMY, Ca, PHOS, GGT, CHOL, LIPA, GLOB#, A/G#, B/C#, UREA#	10 rotori
SKYLA10	Equino 19 parametri	ALP, AST, BUN, CREA, GLU, ALB, TP, TBIL, Ca, Na, K, GGT, CPK, tCO2, GLOB*, A/G*, B/C*, Na/K*, UREA#	10 rotori
SKYLA11	Esotico 15 parametri	AST, GLU, ALB, TP, Ca, PHOS, Na, K, Cl ⁻ , BA, CPK, UA, Na/K*, GLOB*, A/G*	10 rotori
SKYLA12	Liver Plus 13 parametri (EPATICO)	ALP, ALT, AST, BUN, ALB, TP, TBIL, BA, GGT, CHOL, GLOB#, A/G#, UREA#	10 rotori
SKYLA13	Large Animal 18 parametri	ALP, AST, BUN, GLU, ALB, TP, Ca, PHOS, Na, K, Cl ⁻ , GGT, CPK, Mg, GLOB#, A/G#, Na/K#, UREA#	10 rotori * su ordinazione
SKYLA14	Elettroliti 6 parametri	Na, K, Cl ⁻ , tCO2, Na/K#, AGAP#	10 rotori
SKYLA47	Critical Care Panel 20 parametri	ALP, ALT, BUN, CREA, GLU, ALB, TP, CPK, Ca, Na, K, Cl ⁻ , tCO2, LAC, GLOB#, AGAP#, A/G#, B/C#, Na/K#, UREA#	10 rotori
SKYLA15	Diabetico 6 parametri	GLU, TP, ALB, FRU, GLOB#, A/G#	10 rotori
SKYLA16	Ormonale 2 parametri	T4, CHOL	10 rotori

Codice	Parametri doppi	Confezioni
SKYLA18	PHOS, Ca	12 rotori
SKYLA19	AST, CPK	12 rotori * su ordinazione
SKYLA20	ALB, TP	12 rotori
SKYLA21	ALP, ALT	12 rotori
SKYLA22	TRIG, CHOL	12 rotori
SKYLA23	GGT, CPK	12 rotori * su ordinazione
SKYLA24	LIPA, AMY	12 rotori * su ordinazione

Codice	Parametri singoli	
SKYLA25	CREA	12 rotori
SKYLA26	BUN	12 rotori
SKYLA28	TBIL	12 rotori * su ordinazione
SKYLA33	Provette diluente (parametri singoli e doppi)	30 pezzi
SKYLA34	LACT	12 rotori * su ordinazione
SKYLA35	UPC test (UPRO + UCRE)	12 rotori
SKYLA51	BA	12 rotori * su ordinazione
SKYLA53	Glucosio	12 rotori

Codice	Parametri immunologici / Ormonali	
SOL1	PHBR Fenobarbital Canino/Felino	10 rotori * su ordinazione
SOL2	HbA1C (Canino) Emoglobina Glicata	10 rotori «
SOL3	CRP	10 rotori «
SOL4	SAA	10 rotori «

* Parametri calcolati

* su ordinazione
Tempo previsto di attesa: circa 1 mese

Skyla VB1 Plus

Veterinary Dry Chemistry Analyzer
Chimica clinica secca

Analizzatore automatico

Con soli 200 μ l di sangue intero, plasma o siero, è possibile effettuare profili completi fino a 20 parametri.

Risultati immediati per **una diagnosi accurata.**



1

**Aggiungere
campione**



2

**Posizionarlo
nell'analizzatore**



3

**Letture e stampe
dei risultati**

Caratteristiche tecniche

- ✓ In grado di eseguire 20 test simultaneamente, test singoli e doppi
- ✓ Risultati affidabili e accurati con circa 10-12 minuti
- ✓ Precisione analoga a strumenti bench top di laboratorio
- ✓ Facile, veloce e intuitivo, di misure contenute
- ✓ LCD schermo touch screen
- ✓ Oltre 50.000 risultati in memoria
- ✓ Specie animali: cane, gatto, cavallo + 6 opzionali
- ✓ Programma QC e calibrazione in ogni test
- ✓ Possibilità di stampa in formato A4
- ✓ **Senza manutenzione**
- ✓ Possibilità interfaccia con software dedicato per memorizzare referti in formato Pdf

Specifiche tecniche

Principio

Metodo: Assorbimento ottico, Kinetic end Point
Sistema Fotometrico: 340 nm ~ 940 nm lunghezza d'onda
Accuratezza: CLIA e CLSI standards

Campioni e Reagenti

Tipo di campione e volume: **Sangue Intero, Siero o Plasma 200 μ l**

System Design

Interfaccia: Touch screen LCD a colori
Memoria: Oltre 50.000 risultati in memoria
Interfaccia: USB/Bar Code Scanner, USB/Printer esterna, RS232, LAN

Condizioni di lavoro


Tempo di analisi: Circa 10-15 minuti
Alimentazione: AC adattatore Input: 100 ~ 240V, 50/60 Hz, 1,4 A Output: 12 V.5A

Dimensioni: 300 mm (H) x 223 mm (L) x 285 (P)

Peso: 5.5 kg



Codice
strumento
SKYLA1

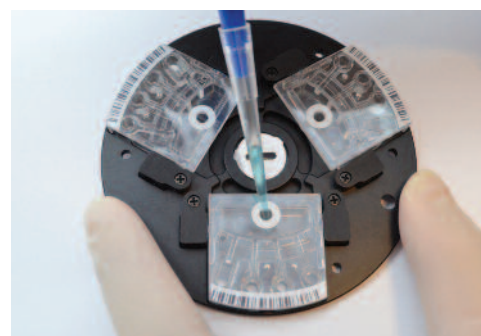

Skyla VB1 Plus

Codice	Rotori	Parametri	Confezioni
SKYLA4	Diagnostico Plus 18 parametri	ALP, ALT, BUN, CREA, GLU, ALB, UREA#, TP, TBIL, AMY, Ca, PHOS, Na, K, GLOB*, A/G*, B/C*, Na/K*	20 rotori
SKYLA5	Diagnostico 17 parametri	ALP, ALT, AST, BUN, CREA, GLU, ALB, TP, TBIL, AMY, Ca, PHOS, CHOL, GLOB*, A/G*, B/C*, UREA#	20 rotori
SKYLA6	Preanestetico 11 parametri	ALP, ALT, BUN, CREA, GLU, ALB, TP, GLOB*, A/G*, B/C*, UREA#	20 rotori
SKYLA7	Renale 13 parametri	Na, K, Cl ⁻ , Ca, PHOS, ALB, BUN, CREA, Na/K*, B/C*, tCO2, AGAP#, UREA#	20 rotori
SKYLA9	Diagnostico II 18 parametri	ALP, ALT, BUN, CREA, GLU, ALB, TP, TBIL, AMY, Ca, PHOS, GGT, CHOL, LIPA, GLOB#, A/G#, B/C#, UREA#	10 rotori
SKYLA10	Equino 19 parametri	ALP, AST, BUN, CREA, GLU, ALB, TP, TBIL, Ca, Na, K, GGT, CPK, tCO2, GLOB*, A/G*, B/C*, Na/K*, UREA#	10 rotori
SKYLA11	Esotico 15 parametri	AST, GLU, ALB, TP, Ca, PHOS, Na, K, Cl ⁻ , BA, CPK, UA, Na/K*, GLOB*, A/G*	10 rotori
SKYLA12	Liver Plus 13 parametri (EPATICO)	ALP, ALT, AST, BUN, ALB, TP, TBIL, BA, GGT, CHOL, GLOB#, A/G#, UREA#	10 rotori
SKYLA13	Large Animal 18 parametri	ALP, AST, BUN, GLU, ALB, TP, Ca, PHOS, Na, K, Cl ⁻ , GGT, CPK, Mg, GLOB#, A/G#, Na/K#, UREA#	10 rotori * su ordinazione
SKYLA14	Elettroliti 6 parametri	Na, K, Cl ⁻ , tCO2, Na/K#, AGAP#	10 rotori
SKYLA47	Critical Care Panel 20 parametri	ALP, ALT, BUN, CREA, GLU, ALB, TP, CPK, Ca, Na, K, Cl ⁻ , tCO2, LAC, GLOB#, AGAP#, A/G#, B/C#, Na/K#, UREA#	10 rotori
SKYLA15	Diabetico 6 parametri	GLU, TP, ALB, FRU, GLOB#, A/G#	10 rotori
SKYLA16	Ormonale 2 parametri	T4, CHOL	10 rotori

Codice	Parametri doppi	Confezioni
SKYLA18	PHOS, Ca	12 rotori
SKYLA19	AST, CPK	12 rotori * su ordinazione
SKYLA20	ALB, TP	12 rotori
SKYLA21	ALP, ALT	12 rotori
SKYLA22	TRIG, CHOL	12 rotori
SKYLA23	GGT, CPK	12 rotori * su ordinazione
SKYLA24	LIPA, AMY	12 rotori * su ordinazione

Codice	Parametri singoli	
SKYLA25	CREA	12 rotori
SKYLA26	BUN	12 rotori
SKYLA28	TBIL	12 rotori * su ordinazione
SKYLA33	Provette diluente (parametri singoli e doppi)	30 pezzi
SKYLA34	LACT	12 rotori * su ordinazione
SKYLA35	UPC test (UPRO + UCRE)	12 rotori
SKYLA51	BA	12 rotori * su ordinazione
SKYLA53	Glucosio	12 rotori

Codice	Accessori consumabili
SKYLA36	Pipetta 50 µl
SKYLA41	Pipetta 220 µl - volume fisso
SKYLA45	QC Level 1 (5 ml) + Diluent (5 ml)
SKYLA46	QC Level 2 (5 ml) + Diluent (5 ml)
CARTA	Carta termica per stampante (1 rotolo)
PARTI VB12	Bilanciere per rotori singoli

* Parametri calcolati


* su ordinazione
Tempo previsto di attesa: circa 1 mese

Analizzatore automatico multifunzione RANDOM ACCESS

Analizzatore compatto, completamente automatico, particolarmente adatto per laboratori di medie dimensioni.

Capacità di eseguire oltre 200 test/ora, con gestione di campioni in maniera sequenziale, flusso casuale e urgenze.

SPHERA è la scelta ideale per ambulatori e cliniche veterinarie.

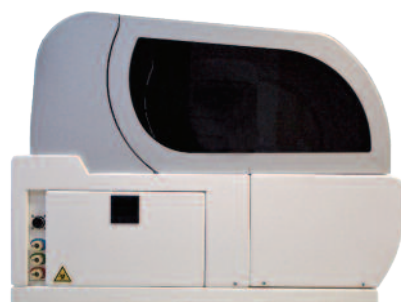

Codice strumento
SPHERA1

Parametri misurati

LO STRUMENTO PUO' EFFETTUARE I SEGUENTI PROFILI SU: CANE, GATTO, CAVALLO, QC, PIU' ALTRE 10 SPECIE ANIMALI.

PROFILO STD: ALBUMINA (ALB), CALCIO (Ca), FOSFORO (PHOS), PROTEINE TOTALI (TP), GLUCOSIO (GLU), BILIRUBINA TOTALE (TBIL), UREA (BUN), GOT (AST), GPT (ALT), GAMMA GT (GGT), FOSFATASI ALCALINA (ALP), CREATININA (CREA) - VOLUME CAMPIONE: circa 300 µl di plasma (con provetta Li-eparina) o siero.

PROFILO GENERALE: PROFILO STD + CLORO (Cl), POTASSIO (K), SODIO (Na), COLESTEROLO (CHOL), TRIGLICERIDI (TRIG), FERRO (FE), CK NAC (CPK), AMILASI (AMY), LIPASI (LIP), LDH, Rapporto A/G, Globuline, Rapporto BUN/CREA, Rapporto Na+/K. - VOLUME CAMPIONE: circa 400 µl di plasma (con provetta Li-eparina) o siero.

PROFILO URINARIO: PROTEINE URINARIE (PU), CREATININA URINARIA (CU), RAPPORTO PU/CU - VOLUME CAMPIONE: circa 10 µl di urina.

SI POSSONO ESEGUIRE A RICHIESTA: COLINESTERASI, FRUCTOSAMINA, ACIDI BILIARI (BA), MAGNESIO (Ma), CRP cane.

LO STRUMENTO ESEGUE LA CALIBRAZIONE AUTOMATICA DI OGNI PARAMETRO.

Caratteristiche tecniche

- Completamente automatico Random Access Analyzer;
- **Oltre 200 test/ora;**
- **30 test on board**, in continuo;
- **60 posizioni** per campioni in provetta primaria
- Sistema automatico di pulizia dell'ago di aspirazione interno ed esterno dopo ogni operazione;
- Sistema di agitazione del campione sulla probe;
- Possibilità di eseguire analisi di immunoturbidimetria
- **Piatto refrigerato estraibile, con sistema Peltier;**
- **Stazione di lavaggio per cuvette (8 step di lavaggio)**
- Sensore di livello per reattivi
- Calibrazione programmabile dall'utente
- Scarico biologico separato
- Ago con sensore di livello
- Software dedicato veterinaria
- Volume campione: programmabile 2-300 µl
- Volume reagente: 2-350 µl
- Tensione di rete: 110/240 VCA 60 HZ
- Interfaccia: USB port, HOST/LIS: LAN, Standard ASTM-ASCII protocol
- Dimensioni: larghezza cm 62 - profondità cm 60 - altezza cm 49
- Peso kg 38
- External computer: caratteristiche minime richieste
CPU: Intel i3 o superiore / RAM 4GB / I/O: USB 2.0 Port
Display risoluzione 1280x768 / OS Microsoft Windows 7,8-8,1-10



Analizzatore automatico multifunzione RANDOM ACCESS

Il giusto compromesso

Questo analizzatore di ultima generazione con un sistema ad alta velocità, fino a **250 test/ora**, riduce i tempi di esecuzione e aumenta notevolmente le prestazioni.



Codice strumento
PULSAR1

Parametri misurati

LO STRUMENTO PUO' EFFETTUARE I SEGUENTI PROFILI SU: CANE, GATTO, CAVALLO, QC, PIU' ALTRE 10 SPECIE ANIMALI.

PROFILO STD: ALBUMINA (ALB), CALCIO (Ca), FOSFORO (PHOS), PROTEINE TOTALI (TP), GLUCOSIO (GLU), BILIRUBINA TOTALE (TBIL), UREA (BUN), GOT (AST), GPT (ALT), GAMMA GT (GGT), FOSFATASI ALCALINA (ALP), CREATININA (CREA) - VOLUME CAMPIONE: circa 300 µl di plasma (con provetta Li-eparina) o siero.

PROFILO GENERALE: PROFILO STD + CLORO (Cl), POTASSIO (K), SODIO (Na), COLESTEROLO (CHOL), TRIGLICERIDI (TRIG), FERRO (FE), CK NAC (CPK), AMILASI (AMY), LIPASI (LIP), LDH, Rapporto A/G, Globuline, Rapporto BUN/CREA, Rapporto Na⁺/K. - VOLUME CAMPIONE: circa 400 µl di plasma (con provetta Li-eparina) o siero.

PROFILO URINARIO: PROTEINE URINARIE (PU), CREATININA URINARIA (CU), RAPPORTO PU/CU - VOLUME CAMPIONE: circa 10 µl di urina.

SI POSSONO ESEGUIRE A RICHIESTA: COLINESTERASI, FRUCTOSAMINA, ACIDI BILIARI (BA), MAGNESIO (Ma), CRP cane.

LO STRUMENTO ESEGUE LA CALIBRAZIONE AUTOMATICA DI OGNI PARAMETRO.

Caratteristiche tecniche

Produttività	fino a 250 test/ora
Dimensioni	cm 76 x 74 cm
Peso	50 kg
Tipo di braccio	1 braccio di pipettaggio con corsa 110 mm per provette campione da 100 mm per flaconi di reagente da 50 µl o 24 µl Sensore d'urto 2D
Vassoio reagenti/campioni	36 posizioni dei reagenti 36 posizioni delle provette campione + 36 posizioni delle coppette campione Lettore di codici a barre per campioni e reagenti
Refrigerazioni	-15°C dalla temperatura ambiente con controllo della temperatura
Materiale di consumo	80 cuvette riutilizzabili con stazione di lavaggio a 8 fasi
Sensore del coperchio	Sensore magnetico di sicurezza
Filtri	Predefiniti 340, 405, 505, 546, 578, 600, 650, 700 nm
Software	Hi software v. 1.5

Analizzatore morfologico multifunzionale 4-in-1 AI Diagnostics

L'analizzatore morfologico multifunzionale AI-100Vet Elite è una soluzione avanzata e automatizzata per analisi veterinarie su sangue, feci, sedimenti urinari e fluidi/versamenti in diverse specie animali, inclusi piccoli mammiferi e rettili.

Progettato per semplificare l'analisi morfologica, questo sistema utilizza il rilevamento di immagini tramite microscopo **4K** supportato dall'intelligenza artificiale, al fine di generare referti analitici dettagliati sulla composizione cellulare.

Il software basato sull'AI aggiorna e migliora continuamente le sue capacità diagnostiche, offrendo un'accuratezza e informazioni senza precedenti per i laboratori veterinari.




Codice strumento
Awalife1

AI-100Vet Elite

vs

Metodo tradizionale

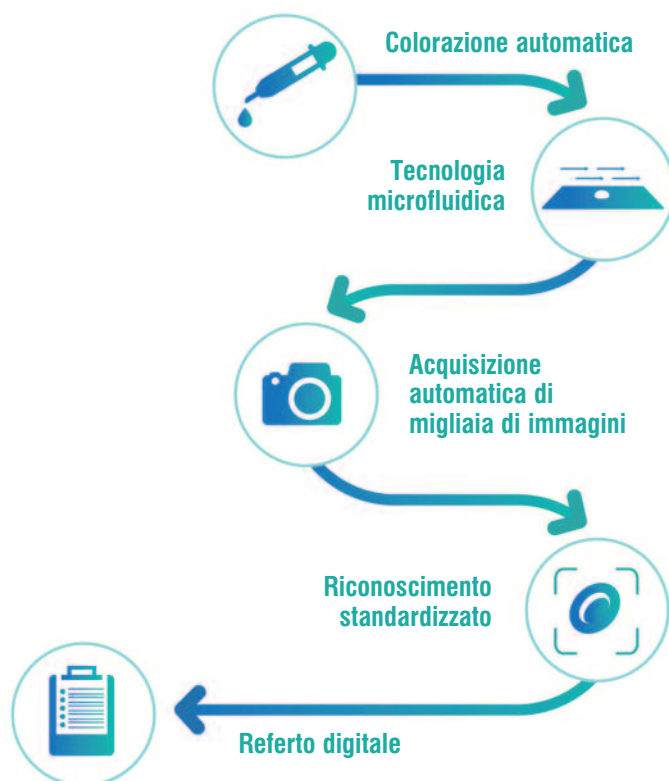

SANGUE: standard di eccellenza con il referto ematologico più completo.

Sangue: 52 Parametri.

Differenziazione dell'anemia e IMHA



L'analizzatore **AI-100Vet Elite** offre risultati completi e grazie ai suoi parametri esclusivi ti garantisce un processo decisionale più affidabile.



Conta dei neutrofili a banda



Conta dei reticolociti



Conta piastrinica accurata



Conta dei neutrofili segmentati e ipersegmentati




Conta RBC nucleati



Conta RBC agglutinati

FECI: esame coprologico


Feci: Parassiti e protozoi

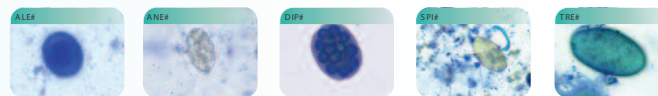

- Ascaridi
- Ancilostomi
- Spirometra
- Dipylidium
- Tricuridi
- Cisti di Giardia
- Coccidi

URINE: esame del sedimento urinario di alta qualità

Urine: 21 Parametri. Cilindri, cristalli, germi e cellule. Malattie renali, cistiti, uroliti...

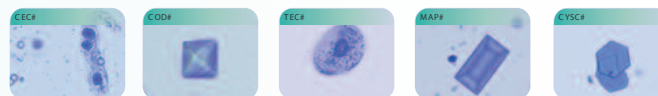


- Cilindri
- Cristalli
- Cellule
- Batteri/
lieviti
- Altri

VERSAMENTI:

- Pleurici
- Addominali

Versamenti: 19 Parametri. TNCC, RBC, Batteri

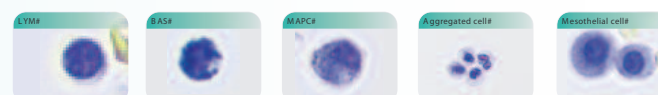



Principio di misura

Basato sul Gold Standard CBC: striscio di sangue

AI-100Vet Elite, più specie, più parametri, più preciso.



Interpretazione più accurata

- **Tecnologia a microfluidi:**
permette la formazione di un monostrato cellulare, migliorando significativamente l'accuratezza delle analisi.

Rapporto completo con immagini morfologiche e raccomandazioni diagnostiche in 7-9 minuti.

Senza manutenzione

Analizzatore progettato in assenza di parte idraulica.
Kit di test monouso: zero manutenzione.
Basso costo per analisi.



Più intelligente

- **Piattaforma cloud AI:**
aggiornamenti in automatico.
- **Approfondimenti diagnostici istantanei:**
referti generati automaticamente.



Meno interferenze

- **Colorazione esclusiva a base liquida.**

Caratteristiche tecniche

Dimensioni	50 x 33,5 x 49 cm
Peso	16,7 kg
Display	Touch Screen
Software	AI, intelligenza artificiale
Alimentazione	220 V - 50/60 Hz

Codici reagenti / consumabili-test

Awalife1	AI-100Vet Elite Analizzatore morfologico Multifunzione 4-1 (sangue - feci - urine - fluidi / versamenti) completo di starter kit
Awalife4	Kit sangue Dual Channel 40 test
Awalife5	Kit feci Dual Channel 40 test
Awalife6	Kit urine Dual Channel 40 test
CentrifugaAwa	Centrifuga a rotore mobile orizzontale

Analizzatore morfologico

2-in-1 AI Diagnostics: 52 Parametri / 7-Part Diff.

L'analizzatore morfologico AI-80 Vet è una soluzione avanzata e automatizzata per analisi veterinarie su sangue e versamenti in diverse specie animali, inclusi piccoli mammiferi e rettili.

Progettato per semplificare l'analisi morfologica, questo sistema utilizza il rilevamento di immagini tramite microscopio **4K** supportato dall'intelligenza artificiale, al fine di generare referti analitici dettagliati sulla composizione cellulare.

Il software basato sull'AI aggiorna e migliora continuamente le sue capacità diagnostiche, offrendo un'accuratezza e informazioni senza precedenti per i laboratori veterinari.

NEW





Codice strumento
Awalife8

AI-80 Vet

vs

Metodo tradizionale

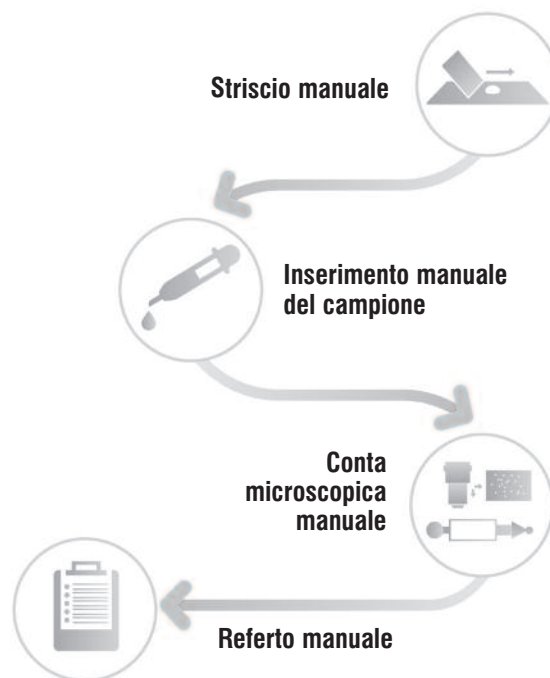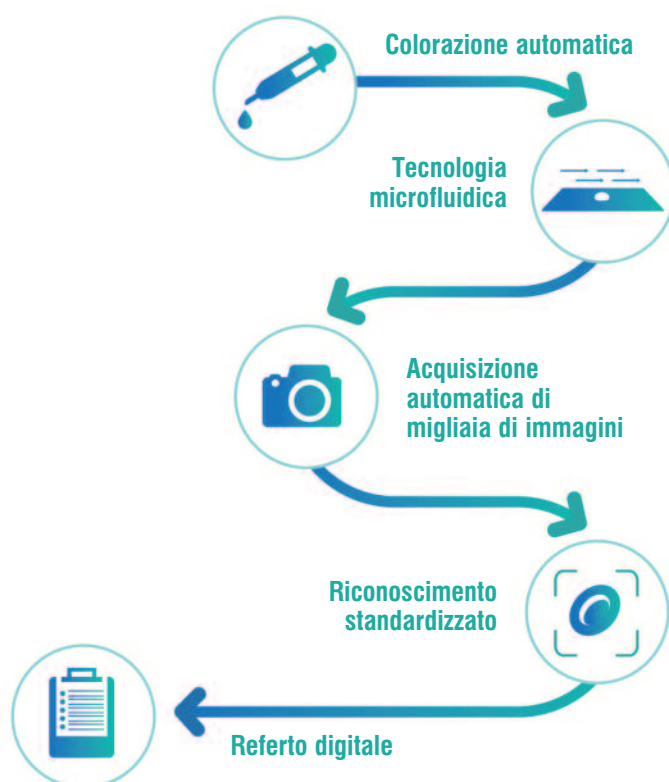

Caratteristiche tecniche

Dimensioni	50 x 33,5 x 49 cm
Peso	16,5 kg
Display	Touch Screen
Software	AI, intelligenza artificiale
Alimentazione	220 V - 50/60 Hz

* Disponibile da Aprile

Codici reagenti / consumabili-test

Awalife8	AI-80 Vet Analizzatore morfologico (sangue) completo di starter kit
Awalife9	Kit sangue 4 Channel 40 test*

SANGUE: standard di eccellenza con il referto ematologico più completo

Sangue: 52 Parametri / 7-Part Diff.
Differenziazione dell'anemia e IMHA



L'analizzatore **AI-80 Vet** offre risultati completi e grazie ai suoi parametri esclusivi ti garantisce un processo decisionale più affidabile.



Conta dei neutrofili a banda



Conta dei reticolociti



Conta piastrinica accurata



Conta dei neutrofili segmentati e ipersegmentati




Conta RBC nucleati



Conta RBC agglutinati

Referto ematologico

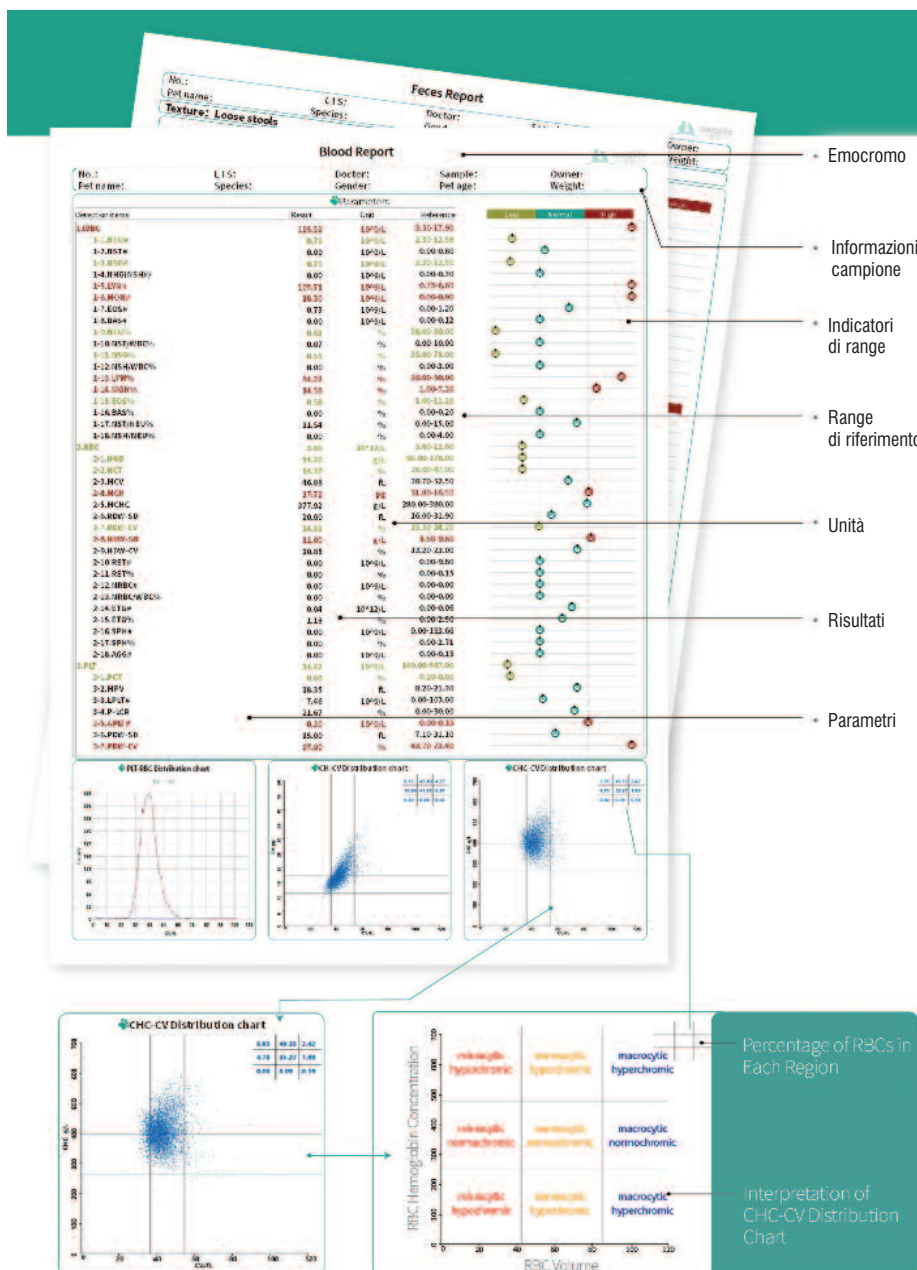

Sangue: Standard di eccellenza

WBC: formula leucocitaria a 7 Part Diff.

Globuli bianchi (WBC)
Neutrofili (NEU)
Granulociti neutrofili banda (NST)
Granulociti neutrofili segmentati (NSG)
Granulociti neutrofili ipersegmentati (NSH)
Linfociti (LYM)
Monociti (MON)
Eosinofili (EOS)
Basofili (BAS)

RBC

Globuli rossi (RBC)
Sferociti (SPH)
Emoglobina (HGB)
Ematocrito (HCT)
Volume cellulare medio (MCV)
Concentrazione corpuscolare emoglobina (MCHC)
Distribuzione globuli rossi (RDW)
Emoglobina corpuscolare media (MCH)
Larghezza distribuzione emoglobina (HDW)
Eritrociti fantasma (ETG)
Globuli rossi nucleati (NRBC)
Reticolociti (RET)
Volume medio reticulociti (MRV)
Larghezza distribuzione reticulociti RDW

PLT

Piastrine (PLT)
Piastrinocrito (PCT)
Volume medio piastrinico (MPV)
Piastrine grandi (LPLT)
Conteggio piastrinico agglutinato (APLT)
Larghezza distribuzione piastrinica (PDW)

Per vedere più chiaramente, lavora in modo intelligente

Interfaccia

Attacco C standard, supporta Nikon, Leica, Olympus e altri sistemi ottici.

Percorso ottico doppio sincrono

Percorso ottico indipendente: 70% oculare, 30% modulo di imaging. Osservazione simultanea e acquisizione delle immagini.

Sistema di trasmissione intelligente

USB 3.0 ad alta velocità (larghezza di banda 5 Gbps). Latenza di visualizzazione del software < 200 ms.

DIY Software interno personalizzato

Include software veterinario con licenza permanente.



Codice strumento
AwalifeMicro

1. Funzione conta cellulare.



Current total:17	/ WBC N:4 P:23.53 %	* RBC N:6 P:35.29 %	
7	8	9 HGB N:7 P:41.18 %	+
4	5	6	
1	2	3	Enter
0			

2. Supporta l'annotazione di diverse forme geometriche (freccie, cerchi, rettangoli).



3. Scala digitale con calibrazione automatica e visualizzazione dei μm in tempo reale.



Analisi intelligente assistita

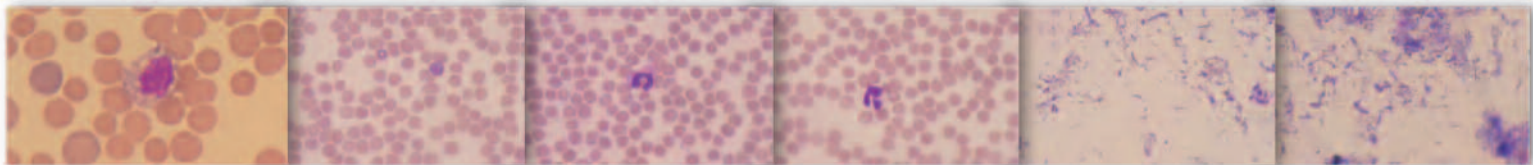


Foto & Video

Acquisizione/registrazione con un clic, integrazione rapida dei report, condivisione in tempo reale.

Foto Risoluzione: 83 MP (3840 x 2160)

Frequenza fotogrammi video: 4K, 30fps



Vantaggi principali

Generazione di report professionali:


Sistema di report personalizzabile con immagini e test.

7 tipi di campioni e 14 modelli di report preimpostati (sangue, feci, urina, pelle, condotto uditivo, tessuti, cellule).



Amplia libreria di immagini di riferimento:

Sangue, urine, feci, cute di cane e gatto (542 immagini integrate).

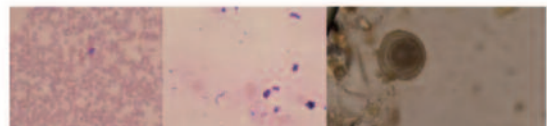

Caratteristiche tecniche

Sistema ottico	4K - Sensore CMOS 830W
Effettiva risoluzione	3840 x 2160 (4K UHD)
Gamma di ingrandimento	40× — 1000×
Illuminazione	Sorgente luminosa a LED fredda da 3 W
Testa di osservazione	Tubo trinoculare incernierato
Oculare	Punto oculare elevato a campo ampio WF10×/φ 20 mm
Obiettivi	Set di obiettivi planacromatici all'infinito 1 4×/0,10; 2 10×/0,25; 3 40×/0,65 (S); 4 100×/1,25 (S, Olio)
Condensatore	Condensatore Abbe N.A. 1.25 con diaframma regolabile, corsa 12 mm
Stage	Ampla piattaforma in filo d'acciaio (140×135 mm), intervallo di movimento 76 mm×52
Alimentazione	Adattatore a bassa potenza 5V 2A
Dimensioni	201×388×490 mm
Peso	7,1 kg

Contaglobuli automatico

5 part-diff Laser per la determinazione di 25 parametri

2 istogrammi RBC/PLT, 2 scattering WBC 5 part-diff, segnalazione di grandi cellule immature e linfociti anormali.

Software veterinario per la determinazione di diverse specie animali.



Ciclo di lavaggio estremamente ridotto e richiesto ogni 200 campioni.

Stampa referti su printer formato A4.

Software in lingua italiana.



Codice strumento
H60 Vet1

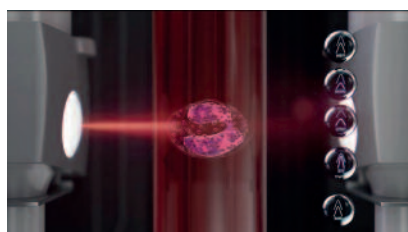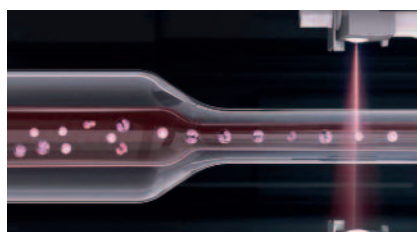

Doppia tecnologia, Impedenziometrica e Laser a doppio angolo con citometria a flusso per ottenere la migliore differenziazione della formula leucocitaria. Lisante Cyanide Free

5-PART DIFF
10 DIFF parameters
2 scattergrams
Chiare definizioni delle sottopopolazioni leucocitarie.

LIC
Flag grandi cellule immature
In caso di probabile polmonite, l'emolisi LIC potrebbe essere un indicatore.

ALY
Flag linfociti anormali
ALY indicatore allergia di parassitizzazione.

EOSINOFILIA
Alta specificità per eosinofili

Parametri misurati

LO STRUMENTO PUO' EFFETTUARE I SEGUENTI PROFILI SU: CANE, GATTO, CAVALLO*, SCIMMIA*, TOPO*, MAIALE*, CAPRA*, CONIGLIO*

25 parametri: WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, RDW-CV, RDW-SD, MCH, MCHC, PLT, MPV, PCT, PDW, PLCR, PLCC, LYM%, LYM#, MON%, MON#, NEU%, NEU#, EOS%, EOS#, BAS%, BAS#.

6 parametri FLAGS: ALY#, ALY%, LIC#, LIC%, NLR, PLR.

2 istogrammi: RBC, PLT

2 scattergrammi: WBC DIFF, BASO

* Di prossima introduzione

Caratteristiche tecniche

Capacità analitica	60 test/ora
Modalità sangue intero	16 microlitri
Modalità prediluita	20 microlitri
Display	Touch Screen a colori, TFT da 12,1 pollici
Temperatura	15 °C - 32 °C
Umidità	30% RH ~ 85% RH
Pressione dell'aria	70 kPa ~ 106 kPa
Dimensioni	501 x 320 x 502,5 mm
Peso	29,3 kg

Codici reagenti

H60 DILUENT10	Diluent 10 litri
H60 DILUENT	Diluent 20 litri
H60 LYSE	Lyse 200 ml.
BH6	Probe Cleaner 200 ml.
H60 LYSE	Lyse - 4x200 ml.

Coatron X Pro

Coagulazione

Coagulometro semiautomatico bicanale

di piccole dimensioni, monitor touch screen, funzionale ed affidabile in grado di eseguire 2 test simultaneamente.

Consumo reattivi estremamente ridotto.

Specifiche prodotto

- Stampante termica opzionale ----->
- Un blocco termostato permette l'incubazione di 20 cuvette più 2 posizioni per l'incubazione del reagente; pratici adattatori permettono l'utilizzo di svariate provette
- Una rapidità di circa 25 test PT/ora e di 10 test APTT/ora sono l'ideale per moli di lavoro medio-piccole
- La lettura inizia automaticamente nel momento in cui campione e reattivi vengono mescolati

Test eseguibili:

PT, APTT, TT, Fibrinogeno, AT - III, D-Dimero

Unità di misura: secondi, %, U (mg/dL o ng/mL)

Completo di start-kit



Codice stampante
COATRON3

Codice strumento
COATRON1

Codici reagenti

PRO48	PT liquida 2 x 4 ml
PRO45	APTT completa 2 x 4 ml + 1 x 8 ml
PRO53	Fibrinogeno Clauss 5 x 2 ml
COATRON10	AT - III * su ordinazione
COATRON9	BLU D-Dimero * su ordinazione
COATRON8	Cuvette per Coatron - Cf. 500 pz. (solo x Coatron X)
COATRON11	Pipetta monocanale 10-50 µl volume variabile

Misuratore di pressione

- Principio di misura: oscillometrico
- Semplice, accurato e affidabile
- Misurazione silenziosa
- Selezione del peso animale
- Batteria ricaricabile
- Monitoraggio dinamico delle pulsazioni
- Sicuro e confortevole
- Map: media lettura su 3 misure
- Con kit bracciali

NEW



Codice strumento
PRESS01

Specifiche prodotto

Misura della pressione sistolica e diastolica:

Range: 0 mm Hg - 280 mm Hg

Accuratezza: +/- 3 mm Hg

Misura delle pulsazioni:

Range: 0 - 300

Accuratezza: +/- 5%



Completo di: Alimentatore di rete
N. 5 bracciali di diverse misure
Cover di protezione in gomma

* su ordinazione

Tempo previsto di attesa: circa 1 mese

qLabs® Coag Vet PT/APTT Combo Coagulazione

Coagulometro portatile a batteria

Utilizzato per la misurazione di PT/APTT Combo su **sangue** intero venoso con solo 10 µl di campione per cani e gatti.

Specifiche prodotto

- Specie animale: cane, gatto
- Touch screen monitor
- Tipo di campione: sangue intero fresco venoso o citrato
- Volume campione: 10 µl
- Tempo di misurazione: 3-7 minuti
- Intervalli di riferimento: cane PT: 12 a 17 sec.
APTT: 96 a 122 sec.
gatto: PT: 13 a 20 sec.
APTT: 96 a 124 sec.
- Range intervallo di tempo: PT 5 - 75 sec.
aPTT 6.5 - 500 sec.
- Range ematocrito: 20% - 70%
- Range temperatura operativa: 10 °C a 35 °C
- QC controllo esterno: preparazione liofilizzata sangue intero
- Precisione: PT ≤ 5.0 CV%
aPTT ≤ 7.0 CV%
- Capacità memoria: > 2000 pazienti
- Alimentazione: alimentatore 100V-240V AC
batterie al litio 2.500 mAh
- Dimensioni: 148 mm x 70 mm x 26 mm (L x P x H)
- Option: eStation II docking system



Codice strumento
QLABS1

Codici accessori e consumabili

- QLABS2** PT/APTT Combo 12 strisce
- QLABS3** QC Controllo liquido
(n. 2 2+2 Flac. 1 ml. cad. Liv. 1-2)
* su ordinazione
- QLABS4** Provette ricalcificanti 12 tubi
* su ordinazione

eStation II for qLabs® Vet

La Docking Station per qLabs® Vet, eStation II, consente di stampare i risultati ottenuti dal qLabs® Vet e di ricaricare le batterie del coagulometro portatile.

Specifiche prodotto

- Carica a contatto di ElectroMeter
- Connessione Bluetooth a ElectroMeter
- Stampa i risultati del test
- Dimensioni: 280 mm x 110 mm x 60 mm (L x P x H)
- Peso: 550 g (esclusa carta termica)
- Alimentazione Ingresso: AC 100-240V~1.6A (max), 50~60 Hz

Accessori

- 1 adattatore di alimentazione
- 1 cavo USB
- 1 x carta termica (ø 50 x 58 mm)
- 1 x driver flash USB (con manuale utente)

Modelli applicabili

- Q-3
- Q-3 Pro
- Q-3 Plus
- QV-3 Plus



Codice strumento
QLABS5

* su ordinazione
Tempo previsto di attesa: circa 1 mese

Emogasanalizzatore Portatile

i15 VET, ad avanzata e compatta tecnologia a cartuccia, utilizza la stessa tecnologia di misura degli emogasanalizzatori da banco comunemente in uso nei reparti critici ospedalieri, garantendo performance analitiche elevate.

Emogasanalisi: sicuramente un'analisi "Speciale Salvavita". Speciale perchè effettua l'analisi dei gas ematici su sangue arterioso/venoso in tempo reale, multiparametrico per il suo monitoraggio di pazienti critici salvabile preciso. Grazie alle informazioni diagnostiche ottenute permette al veterinario di modificare la terapia rendendola appropriata alle esigenze del momento.

L'affidabilità e la precisione analitica del sistema sono garantite dall'esclusivo sistema a cartuccia MONOUSO a MANUTENZIONE ZERO, costituito da soli 2 componenti Plug & Play. Cartuccia micro-sensori monouso, a tecnologia planare, precabrata con calibrazione on-board in fase liquida prima di ogni test.

Software specifico per la veterinaria.

Possibilità di stampa in formato A4



Codice strumento
EMOGAS1

Codici reagenti, consumabili

EMOGAS2	BG8 Cartuccia Test pH, pCO ₂ , pO ₂ , Hct, Na ⁺ , K ⁺ , Ca ⁺⁺ , Cl ⁻ (par. misurati) HCO ₃ , BE, BB, ctCO ₂ , sO ₂ , AnGap, tHB, RI, pO ₂ /FI _{O2} , mOsm. (par. calcolati) Conf. da 25 test
EMOGAS3	BG10 Cartuccia Test pH, pCO ₂ , pO ₂ , Hct, Na ⁺ , K ⁺ , Ca ⁺⁺ , Cl ⁻ , Glu, Lact (par. misurati) HCO ₃ , BE, BB, ctCO ₂ , sO ₂ , AnGap, tHB, RI, pO ₂ /FI _{O2} , mOsm. (par. calcolati) Conf. da 25 test
EMOGAS4	Calibrant Fluid Pack, conf. da 50 test/90 gg.
EMOGAS5	Siringa con tappo autobloccante 1cc - Conf. da 100 pezzi con Eparina bilanciata
	BGE Quality Control
EMOGAS6	Level 1
EMOGAS7	Level 2 (5 ampules / set)
EMOGAS8	Level 3
EMOGAS9	Carta per stampante Conf. da 4 rotoli
EMOGAS11	Siringa ad attacco luer ventilata a riempimento automatico con ago con eparina bilanciata 1 cc. Conf. Da 100 pezzi (arterioso)
EMOGAS12	BC4 Cartuccia Test Na ⁺ , K ⁺ , Cl ⁻ , Ca ⁺⁺ , Hct (par. misurati) tHB, mOsm (par. calcolati) Conf. da 25 test



Codici reagenti, consumabili

Velocità analitica	Risultati in 1 minuto dopo aspirazione campione
Volume campione	140 µl
Interfaccia	4 x USB 2.0 host, 1 x RS232, WLAN
Alimentazione	100-240 VAC, 50/60 Hz
Batteria	4200 mAh ricaricabile litio-ion battery, 50 campioni misure in sequenza
Dimensioni (LxHxP)	238 - 153 - 310 mm
Peso	3,65 kg
Ambiente operativo	0°C-31°C, %RH: 25%-80%; 70-106.6 KPa

Emogasanalizzatore da banco

Adatto per cliniche veterinarie medio-grandi, utilizza un'unica cartuccia omnicomprensiva e non necessita nessuna manutenzione.

Il nuovo emogasanalizzatore autonomo **GEM Premier 5000** è usabile e intuitivo in ogni fase operativa e tutte le attività condotte autonomamente dal sistema sono volte ad assicurare che la qualità dei risultati sia raggiunta e mantenuta in ogni momento. Grazie infatti a **iQM2** (Intelligent Quality Management 2), con il controllo Autonomo IntraSpec™, **GEM Premier 5000** individua e interpreta i potenziali errori, compresi quelli transitori, anche durante l'analisi. Le azioni correttive intraprese e la tracciabilità degli eventi sono garantiti autonomamente dal sistema. **GEM Premier 5000** è semplicemente usabile e utilizza un unico consumabile, omnicomprensivo: GEM PAK.

iQM2 assicura la Qualità dell'intero processo analitico, per ogni campione.



(Foto indicativa)

Con CO-Ossimetria

- Integrata nella cartuccia per completare il profilo analitico mediante unico campionamento, aumentando la flessibilità di impiego
- Analisi chimica del campione, spettro di lettura compreso tra 480 e 650 nm
- Sensore ottico ad elevata risoluzione per garantire accuratezza dei risultati

Analiti Misurati:

pH, pCO₂, pO₂, Na⁺, K⁺, Ca⁺⁺, Cl⁻, Glu, Lac, Hct, tHb, O₂Hb, COHb, MetHb, HHb, tBili, sO₂*

Parametri derivati:

BE(B), BE(ecf), tHb(c), Ca⁺⁺ (7.4), Anion gap, P/F ratio, pAO₂, CaO₂, CvO₂, p50, O₂cap, sO₂(c), sO₂, HCO₃ - std, HCO₃ - (c), A-aDO₂, paO₂/pAO₂, RI, CcO₂, a-vDO₂, Q_{sp}/Q_t (est), Q_{sp}/Q_t, Hct(c)

* sO₂ = O₂Hb/O₂Hb + HHb

Profili disponibili:

Emogas, Hct, tHb, O₂Hb, HHb, COHb, MetHb, sO₂, tBili**

Emogas, Elettroliti, Hct, tHb, O₂Hb, HHb, COHb, MetHb, sO₂, tBili**

Emogas, Elettroliti, Glu, Lac, Hct, tHb, O₂Hb, HHb, COHb, MetHb, sO₂, tBili**

* Stabilità a bordo di 30 giorni

** Optional cartucce disponibili con tBili

Cartucce, calibratori, consumabili

GEM12	GEM Premier 5000 Emogasanalizzatore da banco
GEM10	Cartuccia IQM - 300/test/mese
GEM11	Cartuccia IQM - 450/test/mese
GEM6	Carta - Conf. 5 rotoli



Specifiche tecniche

Strumento	Larghezza	30,5 cm
	Profondità	38,1 cm
	Altezza	45,5 cm
	Peso	20,0 kg
Volume campione		da 65 ⁰ a 150 µl (modalità micro)
Tipo di campione		Sangue intero e altre matrici
Tempo per i risultati		95 sec. per tutti i test inclusa la CO-Ossimetria
dell'introduzione del campione		70 sec. per tutti i test esclusa la CO-Ossimetria
Metodologia di misura	Potenziometria	pH, pCO ₂ , Na ⁺ , K ⁺ , Ca ⁺⁺ , Cl ⁻
	Amperometria	pO ₂ Glucosio, Lattato
	Conduttimetria	Ematocrito
	Spettrofotometria	CO-Ossimetria, Bilirubina totale
Protocolli trasmissione dati		4 porte USB, ASTM/HL7
Connettività Wireless		Integrata
Temperatura della camera di misura		Camera di misura mantenuta a 37 °C nominali
Alimentazione		100-240 VAC, 50-60 Hz
Conformità e norme di prodotto		Marchio CE, secondo la direttiva IVD 98/79/EC Conforme alle norme IEC 61010-1, CEI 65-5, EN 61010-1

Vcheck V200

Immunologia

Più Preciso
che Mai!

Vcheck V200 è stato sviluppato per fornire una diagnosi accurata a basso costo utilizzando una tecnologia d'avanguardia **FLUORESCENT EUROPIUM COMPLEXES**.


Risultati accurati e precisi poiché la lunghezza d'onda della luce stimolante emessa non si sovrappone, evitando così errori di misura.



Codice strumento
VCHECK1



Precisione senza rivali con il metodo di misura a FLUORESCENZA COMPLEX

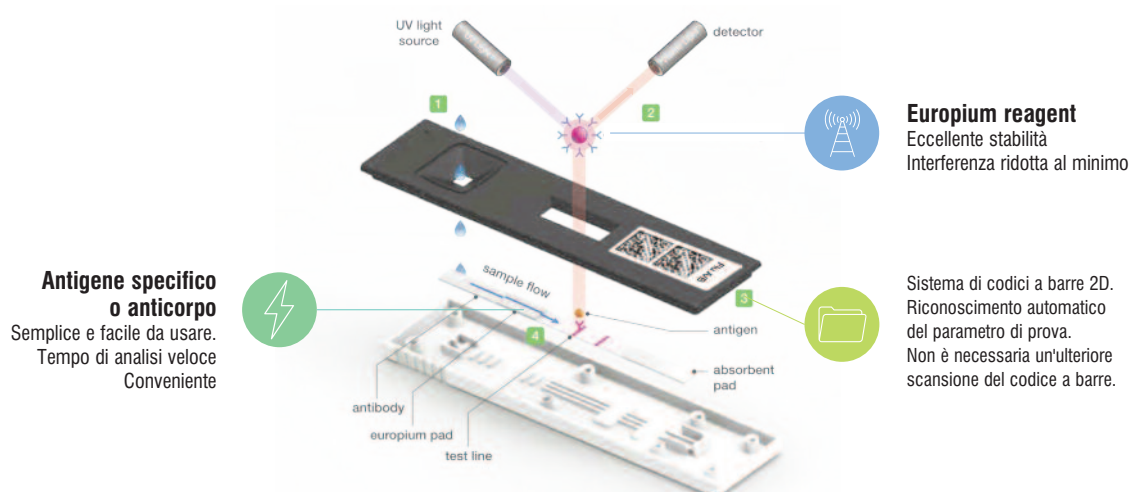

**Antigene specifico
o anticorpo**
Semplice e facile da usare.
Tempo di analisi veloce
Conveniente

Europium reagent
Eccellente stabilità
Interferenza ridotta al minimo

Sistema di codici a barre 2D.
Riconoscimento automatico
del parametro di prova.
Non è necessaria un'ulteriore
scansione del codice a barre.

Caratteristiche tecniche

Tempo di analisi	5 min.
Monitor touch screen	7" TFT
Dimensioni	mm 200 x 240 x 205
Printer	interna
LIS/HIS Connectivity	HL7 V2.6 (PCD-01) POCT 1-A
Peso	2,5 kg
Alimentazione	220V - alimentatore DC12V
Tipo di campione	Siero, Plasma (eparina)



V200 Video

Test disponibili:

- Proteine fase acuta Canino / Felino
- Marcatori Pancreatite
- Test Ormonali
- Indicatore coagulazione/trombosi
- Marcatore cardiaco
- Marcatore cardiaco
- Test Antigene/Anticorpo
- Test Equini
- Biomarker funzione renale

CRP, SAA

cPL, fPL

cCortisolo, T4, TSH canino, Progesterone

D-dimero

NT-proBNP Canina/ Felina

Troponina TnI Canina / Felina

Vcheck RDT

SAA, eProgesterone, Foal IgG

SDMA

Vcheck Ag

Test Antigene

Le malattie infettive canine e feline possono essere diagnosticate rapidamente e con precisione.

Cane


Dirofilaria
Vcheck CHW Ag

Distemper Virus
Vcheck CDV Ag

Parvo/Corona Virus
Vcheck CPV/CCV Ag
(3 lines)

Gatto

Panleukopenia
Vcheck FPV Ag

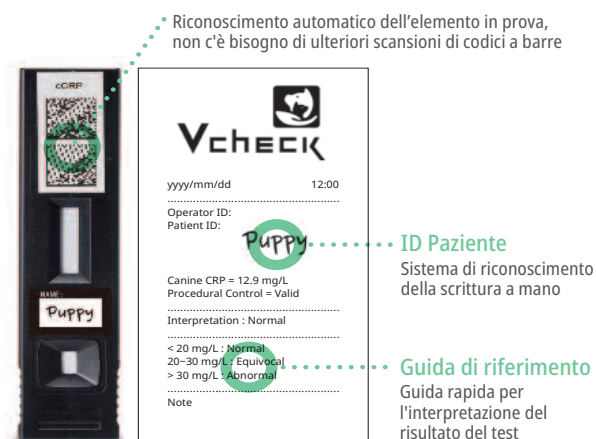

Vcheck Ag

Test Anticorpo

Lo stato immunitario dopo la vaccinazione si base può essere valutato attraverso il titolo anticorpale del test.

Cane

Distemper Virus
Vcheck CDV Ab

Parvo Virus
Vcheck CPV Ab

Gatto

Panleukopenia
Vcheck FPV Ab

Herpes Virus
Vcheck FHV Ab

Calici Virus
Vcheck FCV Ab

Codici test disponibili

VCHECK2	CRP Canina	10 test/kit
VCHECK3	SAA Felina	10 test/kit
VCHECK4	cPL	10 test/kit
VCHECK5	fPL	10 test/kit
VCHECK6	cCortisolo	10 test/kit
VCHECK7	T4	10 test/kit
VCHECK8	TSH Canino	5 test/kit
VCHECK9	Progesterone	10 test/kit
VCHECK22	D-Dimero	10 test/kit
VCHECK32	NT-proBNP Felina	5 test/kit
VCHECK33	NT-proBNP Canina	5 test/kit
VCHECK36	Troponina TnI Canina	5 test/kit
VCHECK41	Troponina TnI Felina	5 test/kit
VCHECK44	SAA Equino	10 test/kit
VCHECK45	eProgesterone	5 test/kit
VCHECK55	SDMA	10 test/kit
VCHECK56	Foal IgG	5 test/kit

Codici test disponibili

VCHECK10	Vcheck CDV Ag	10 test/kit * su ordinazione
VCHECK11	Vcheck FPV Ag	10 test/kit * su ordinazione
VCHECK12	Vcheck CHW Ag	10 test/kit
VCHECK13	Vcheck CPV/CCV Ag	10 test/kit * su ordinazione
VCHECK14	Vcheck CDV Ab	10 test/kit
VCHECK15	Vcheck CPV Ab	10 test/kit
VCHECK16	Vcheck FPV Ab	10 test/kit * su ordinazione
VCHECK17	Vcheck FHV Ab	10 test/kit * su ordinazione
VCHECK18	Vcheck FCV Ab	10 test/kit * su ordinazione
VCHECK58	Vcheck CAV Ab	10 test/kit
VCHECK19	Kit calibratori per Vcheck (3 kit)	
VCHECK51	Set pipette 4 pz.	

* su ordinazione

Tempo previsto di attesa: circa 1 mese

Innovativo. Moderno. Il TUO sistema diagnostico molecolare POC.

Vcheck M valuta la composizione biologica a livello genetico. Esplora il DNA, L'RNA e i geni con elevata sensibilità e specificità. Molto più rapido dei metodi classici di diagnosi garantendo un'accuratezza maggiore.

Vcheck M10



Console M10

Controller semplice e facile con gestione dati

- 10.1" touch screen
- Lettore di codici a barre interno
- Interfaccia user friendly con guida animata
- Memorizza fino a 5.000 risultati
- Connettività continua (LIS/HIS)
- Accurato algoritmo di analisi dei dati

Modulo M10

- Requisiti minimi di manutenzione
- Dimensioni compatte
- Facile connessione tra i moduli
- Configurazione personalizzata fino a 8 moduli



Vcheck M cartuccia

Cartuccia all-in-one multiplex fino a 8-Plex

- Risultato in circa 1 ora (estrazione NA + amplificazione)
- Preparazione pratica di un minuto
- Multiplex utilizzando FAM/HEX/Cy5
- Conservazione a temperatura ambiente




Vcheck M



Codice strumento
VCHECK M1

Perché PCR?

- Elevata sensibilità e specificità ► Risultato accurato
- Diagnosi precoce ► Trattamento efficace

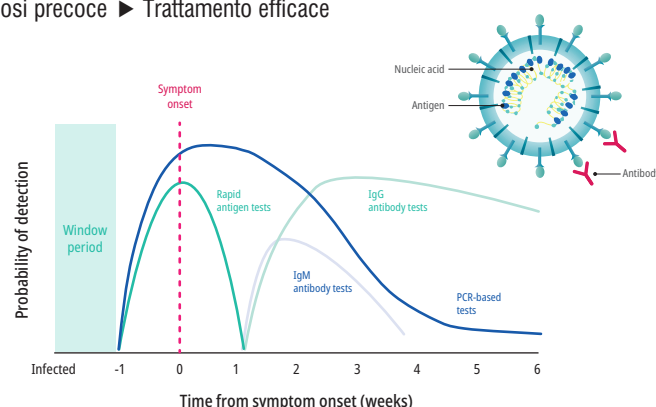


* Reference: Giorgia Guglielmi, Fast coronavirus tests: what they can and can't do, Nature 585, 496-498 (2020)

Caratteristiche tecniche

Modello	Vcheck M10 (console + modulo)
Capacità di prova	1 Test / Modulo
Energia	AC100~240V, 50/60Hz
Condizioni	Temperatura 10-40°C (50-104°F) Umidità 20-80%
Metodo di prova	PCR REAL TIME
Lingua s/W	inglese
Interfaccia esterna	LAN, USB (x4)
LIH/HIS	Supporto del profilo HL7 PCD-01
Dimensioni	Console: 17 x 23 x 39 cm Modulo: 14x33x32 cm
Peso	Console: 2 kg - Modulo: 7 kg
Approvazione	Corea APQA esportazione, CE

Limitazioni della PCR esistente

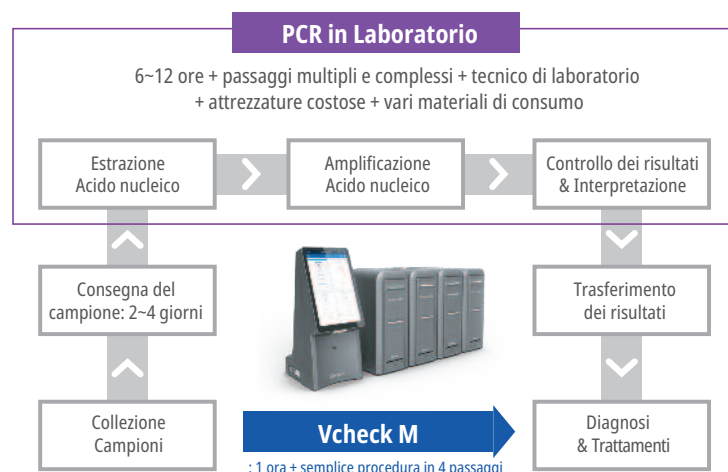

1 Eseguire la scansione dell'ID del campione



2 Eseguire la scansione del codice della cartuccia



3 Applicare il campione e chiudere la cartuccia



4 Inserire la cartuccia e chiudere la cartuccia




Rimuovere la clip di sicurezza



Premere il coperchio



Somministrare il campione

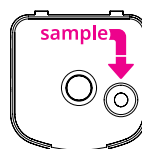

Chiudere il coperchio

Informazioni sull'ordine

Cartucce

Codice	Prodotti	Parametri
VCHECK M2	Vcheck M Ehrlichia/Anaplasma	<i>Ehrlichia</i> spp., <i>Anaplasma</i> spp. (5 test/kit)
VCHECK M3	Vcheck M Babesia gibsoni/canis	<i>Babesia gibsoni</i> , <i>Babesia canis</i> (5 test/kit)
VCHECK M4	Vcheck M Canine Vector 8 Panel	<i>Ehrlichia</i> spp., <i>Anaplasma</i> spp., <i>Babesia</i> spp., <i>Leishmania</i> spp., <i>Rickettsia</i> spp., <i>Bartonella</i> spp., Canine hemotropic mycoplasma (CHM), <i>Hepatozoon</i> spp.
VCHECK M5	Vcheck M Canine Anemia 8 Panel	<i>Ehrlichia</i> spp., <i>Anaplasma</i> spp., <i>Babesia</i> spp., <i>Borrelia</i> spp., (Lyme disease) <i>Rickettsia</i> spp., <i>Leptospira</i> spp., Canine hemotropic mycoplasma (CHM), <i>Hepatozoon</i> spp.
* VCHECK M6	Vcheck M FHV/FCV*	Feline herpesvirus type 1 (FHV-1), Feline calicivirus (FCV)
VCHECK M7	Vcheck M Feline Respiratory 6 Panel	Feline herpesvirus type 1 (FHV-1), Feline calicivirus (FCV), <i>Mycoplasma felis</i> , <i>Chlamydia felis</i> , Influenza virus, <i>Bordetella bronchiseptica</i>
* VCHECK M8	Vcheck M FCoV/FIPV	Feline coronavirus (FCoV), Feline infectious peritonitis virus (FIPV)
* VCHECK M9	Vcheck M Giardia/Tritrichomonas	<i>Giardia</i> spp., <i>Tritrichomonas foetus</i>
VCHECK M10	Vcheck M Feline Diarrhea 8 Panel	Feline panleukopenia virus (FPV), Feline coronavirus (FCoV), <i>Giardia</i> spp., <i>Tritrichomonas foetus</i> , <i>Toxoplasma gondii</i> , <i>Salmonella</i> spp., <i>Clostridium perfringens</i> , <i>Cryptosporidium</i> spp.
VCHECK M11	Vcheck M Canine Diarrhea 8 Panel	Canine parvovirus type 2 (CPV-2), Enteric coronavirus (CECoV), Canine distemper virus (CDV), <i>Giardia</i> spp., <i>Cryptosporidium</i> spp., <i>Salmonella</i> spp., <i>Clostridium perfringens</i> , <i>Campylobacter</i> spp.
VCHECK M12	Vcheck M FIV/FelV	FIV, FelV
VCHECK M13	Vcheck M Canine Respiratory 8 Panel	Canine distemper virus (CDV), Canine adenovirus type 2 (CAV-2), <i>Bordetella bronchiseptica</i> , Canine parainfluenza virus (CPIV), Canine herpesvirus type 1 (CHV-1), Canine respiratory coronavirus (CRCoV), <i>Mycoplasma cynos</i>
* VCHECK M14	Vcheck M AIV Pan/H5/H7/H9	AIV, AIV H5, AIV H7, AIV H9
* VCHECK M15	Vcheck M Feline Anemia 7 Panel	Feline immunodeficiency virus (FIV), Feline leukemia virus (FeLV), <i>Ehrlichia</i> spp., <i>Anaplasma</i> spp., <i>Bartonella</i> spp., <i>Cytauxzoon felis</i> , Feline hemotropic mycoplasma (FHM)
* VCHECK M16	Vcheck M ASFV	ASFV
* VCHECK M17	Vcheck M FMDV Pan/O/A/Asia1	FMDV, FMDV Type O, FMDV Type A, FMDV Type Asia 1
* VCHECK M18	Vcheck M Feline Neurologic 6 Panel	<i>Bartonella</i> spp., <i>Cryptococcus</i> spp., Feline coronavirus (FCoV), <i>Toxoplasma gondii</i> , Feline immunodeficiency virus (FIV), Feline leukemia virus (FeLV)
* VCHECK M19	Vcheck M Canine Neurologic 8 Panel	Canine distemper virus (CDV), <i>Toxoplasma gondii</i> , <i>Neospora</i> spp., <i>Cryptococcus</i> spp., <i>Coccidioides</i> spp., <i>Bartonella</i> spp., <i>Borrelia</i> spp., (Lyme disease), <i>Blastomyces dermatitidis</i>

* Di prossima introduzione

UC-32B Vet Urinalysis Analyzer

Analisi urine

Analizzatore di urine

per la veterinaria con possibilità di stampa, monitor a colori Touch Screen,
con rapporto selettivo e qualitativo PU/CU.

Test / parametri disponibili:



WBC, KET, URO, BIL, PRO, GLU, SG, BLD, pH, VC, CR, CA, MA + PCR

Caratteristiche tecniche

- Misura: Riflettanza Fotometrica
- Dimensioni: 130 (L) x 70 (P) x 29 (H) mm
- Alimentazione: batterie ricaricabili (300 test/ricarica completa)
- Produttività analitica: 80 test/hour
- Interfaccia: USB, Bluetooth
- Peso: 200 g
- Memoria: 2000 results
- Optional: stampante esterna, bluetooth

Codici consumabili

- UC3** Strisce UC Vet Plus - Conf. 50 pezzi
UC4 Carta per stampante - Analizzatore UC-32B Vet - 1 rotolo

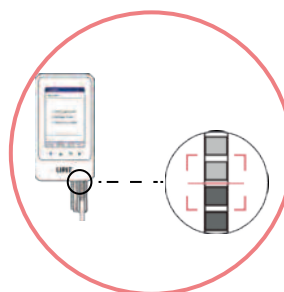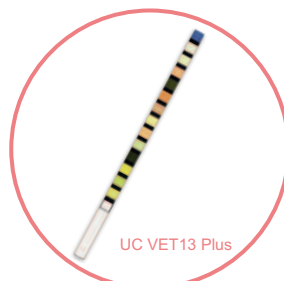

UC1

Analizzatore urine
UC-32B Vet
a batterie completo
di stampante



BELUA   
Misuratore di Glicemia e Ketoni
su sangue per Cani, Gatti, Vacche da latte

Sicurezza e accuratezza: queste qualità vengono soddisfatte dall'innovativo WellionVet BELUA, misuratore della glicemia e ketoni su sangue capillare o venoso.

Il WellionVet BELUA è stato sviluppato per Cani, Gatti e Vacche da latte.
Il dispositivo utilizza specifici code chips per le tre specie animali.



Codice
strumento
BELUA5

wellion^{vet}

Codici consumabili

- BELUA2** Strisce Glucosio da 50 pz.
BELUA3 Strisce Ketoni da 10 pz. (cani, gatti)
BELUA4 Strisce Ketoni da 20 pz. (vacche da latte)
GLUC04 Lancette 18G Box 200 pz.
GLUC03 Lancette 23G Box 200 pz.

**GLU
+
KET**

TEST: GLUCOSIO E KETONI SU SANGUE

**CAPILLARY
& VENOUS
FOR GLUCOSE
50H/FAD**

SANGUE FRESCO CAPILLARE O VENOSO

(CANE, GATTO)

1 CONFEZIONE GLICEMIA DA 50 STRISCE A SOLO

€ 75,00 + IVA



(CANE, GATTO)

1 CONFEZIONE KETONI DA 10 STRISCE A SOLO

€ 79,00 + IVA



(VACCHE DA LATTE)

**1 CONFEZIONE KETONI DA 20
STRISCE A SOLO**

€ 73,00 + IVA



*** OFFERTA VALIDA SOLO AL PRIMO ORDINE**

*** IN OMAGGIO UN MISURATORE BELUA INCLUSO 10 STRISCIE GLICEMIA CANE e GATTO**

**INVIARE ORDINI A:
info@isomedic.com**

Software Gestionale Strumenti Lab.


IsoLABLink è un software per la connessione, gestione dati e informazioni relative agli strumenti **ISOMEDIC** e di altre aziende operanti nei laboratori per analisi veterinari.

Consente la comunicazione bi-direzionale con strumenti per la determinazione dei parametri di chimica clinica, ematologia, emogas, immunologia e altri strumenti diagnostici di laboratorio.

Per mezzo di questo software è possibile gestire l'anagrafica del paziente, i riferimenti del proprietario, i risultati delle determinazioni effettuate, controllo di qualità e possibilità di inserire commenti sul referto senza dover interrompere la normale routine.

Visualizzazione statistiche, SD
(Deviazione Standard)

Possibilità di assistenza tecnica in remoto.

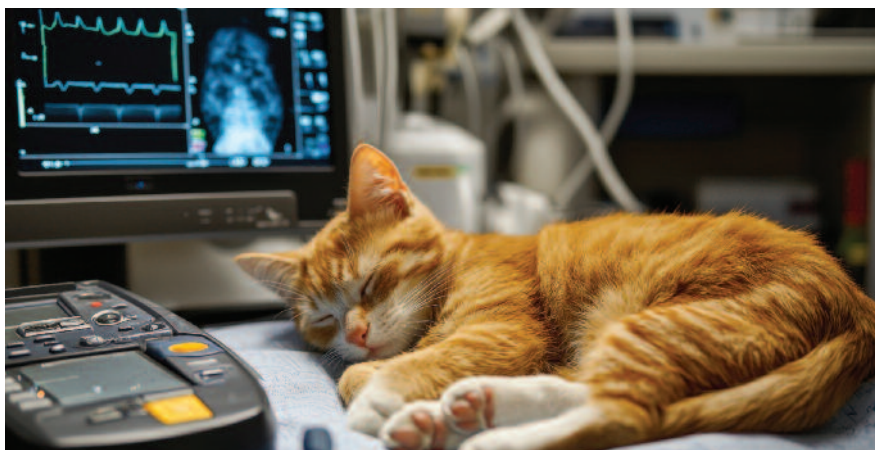

Codici Accessori e consumabili

ISOLABLINK	Software ISOLABLINK
ST0089	Switch LAN 8 porte
ST0092	Cavo LAN 1 metro
ST0093	Cavo LAN 2 metri
ST0099	Cavo LAN 3 metri
ST0052	PC Personal Computer

Caratteristiche Hardware

- Processore ultima generazione
- Memoria RAM 4 GB o superiore
- Scheda di rete Ethernet 10/100
- Min. N. 2 porte USB
- Scheda multi seriale RS232 I/O (opzionale)
- Sistema operativo Windows 7/8/10 o successivo.



Linea
Test Rapidi

TEST RAPIDI per la veterinaria

Linea completa di test diagnostici, accurati, per lo screening di diverse malattie animali.

DIROFILARIA - Kit 10 test

RIF. RG 11-02

Kit/test rapido in fase solida con principio immunocromatografico per la determinazione qualitativa degli antigeni della **Dirofilaria Immitis Canina** su sangue intero, plasma o siero.




Cod. TEST1

Temperatura di conservazione: 2-30 °C
Sensibilità: 94,4% - Specificità: 100%

GIARDIA - Kit 10 test

RIF. RG 18-04

Kit/test rapido con principio immunocromatografico per la determinazione qualitativa della **Giardia Lamblia** in campioni di feci di cane e gatto.

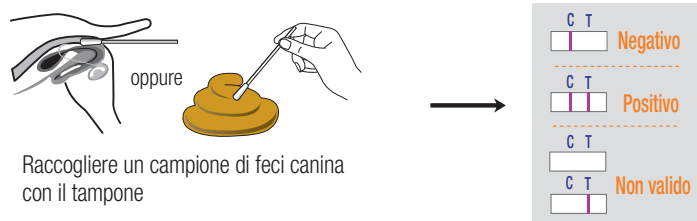


Cod. TEST2

Temperatura di conservazione: 2-30 °C
Alta sensibilità e specificità

LEISHMANIA - Kit 10 test

RIF. RB 21-04

Kit/test rapido con principio immunocromatografico per la determinazione qualitativa della **Leishmania** su sangue intero, siero, plasma canino.

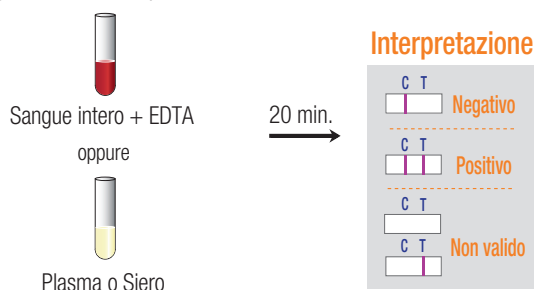


Cod. TEST3

Sensibilità: 95,6% - Specificità: 98%

E. CANINS Ab. - Kit 10 test

RIF. RB 21-05

Kit/test rapido con principio immunocromatografico per la determinazione dell'**Ehrlichia Canina** su sangue intero, siero e plasma.

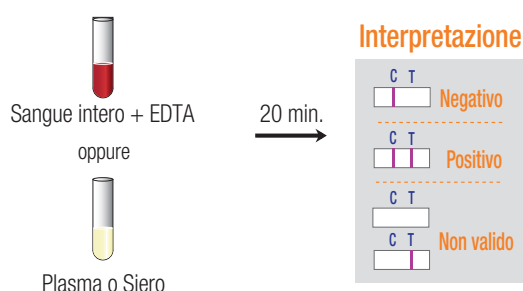


Cod. TEST4

Temperatura di conservazione: 2-30 °C
Sensibilità: 97,6% - Specificità: 99%

FIV/FelV - Kit 10 test


RIF. RC 12-04

Kit/test rapido doppio con principio immunocromatografico per la determinazione del virus di immunodeficienza (FIV) e Leukemia (FeLV) su sangue intero, plasma o siero felino.

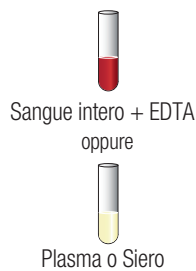

10 min.

Interpretazione

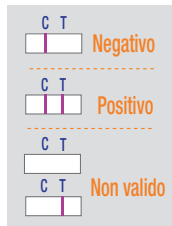

Cod. TEST5

Temperatura di conservazione: 2-30 °C

Sensibilità: 96,8% (FIV Ab) - 94,7% (FeLV Ag)

Specificità: 99,6% (FIV Ab) - 99,7% (FeLV Ag)

CPV/CCV - Kit 10 test


RIF. RG 11-05

Kit/test rapido in fase solida con principio immunocromatografico per la determinazione qualitativa simultanea di Parvovirus e Coronavirus Canino su feci.



5-10 min.

Interpretazione

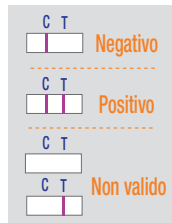

Cod. TEST6

Temperatura di conservazione: 2-30 °C


Sensibilità: 100% (CPV Ag) - 93,1% (CCV Ag)

Specificità: 98,8% (CPV Ag) - 97,5% (CCV Ag)

FPV Ag - Kit 10 test * su ordinazione


RIF. RG 12-03

Kit/test rapido con principio immunocromatografico per la determinazione qualitativa dell'antigene della Panleukopenia Felina, su feci.

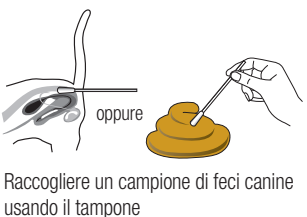

5-10 min.

Interpretazione

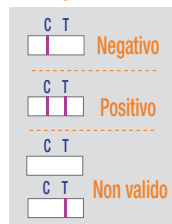

* su ordinazione

Tempo previsto di attesa: circa 1 mese



Cod. TEST9

Temperatura di conservazione: 2-30 °C


Sensibilità: 97% vs. RT-PCR

Specificità: 98,5% vs. RT-PCR

Caniv-4 - Kit 10 test (Dirofilaria, Ehrlichia, Lyme Borrelia, Anaplasma)

RIF. RB 21-20

Kit/test rapido con principio immunocromatografico, su sangue intero, plasma o siero canino.

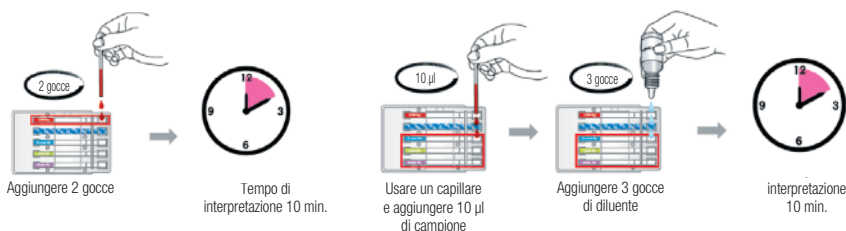

Cod. TEST10


Temperatura di conservazione: 2-30 °C

Alto grado di accuratezza

CaniV-4 (Leish) - Kit 10 test (Dirofilaria, Ehrlichia, Leishmania, Anaplasma)

RIF. RC 2127DD

Kit/test rapido con principio immunocromatografico, su sangue intero, plasma o siero canino.

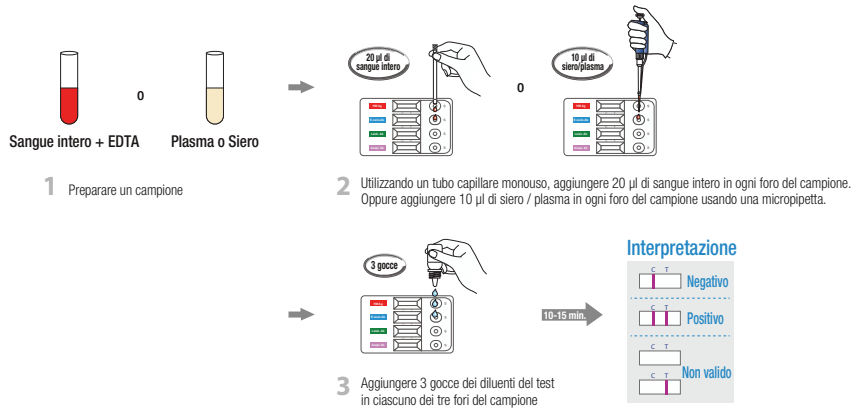


Cod. TEST29

Temperatura di conservazione: 2-30 °C
Alto grado di accuratezza

DIARRHEA CANINA Tripla - Kit 5 test (CPV / CCV / GIARDIA Ag)

RIF. RG 11-12

Test TRIPLA con principio immunocromatografico per la determinazione qualitativa di **Parvovirus**, **Coronavirus** e **Giardia Canina** su feci.

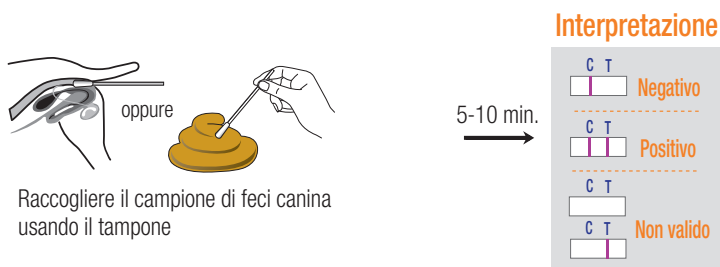


Cod. TEST11

Temperatura di conservazione: 2-30 °C
Alta sensibilità e specificità

DIARRHEA FELINA Tripla - Kit 5 test (FPV Ag / FCoV Ag / GIARDIA Ag)

RIF. RC 1208DC

Test TRIPLA con principio immunocromatografico per la determinazione qualitativa di **Parvovirus**, **Coronavirus** e **Giardia Felina** su feci.

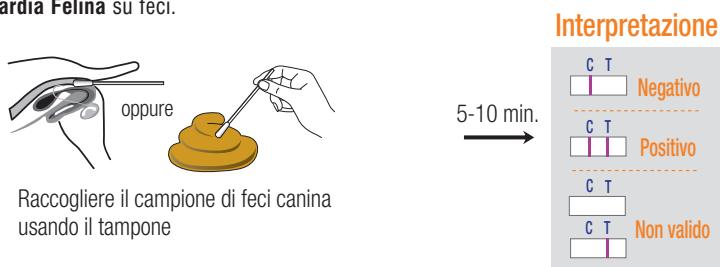

Cod. TEST37

Temperatura di conservazione: 2-30 °C
Alta sensibilità e specificità

E. CANINS/LEISHMANIA Ab. - Kit 10 test * su ordinazione

RIF. RC 2125DD

Per la determinazione qualitativa dell'**Ehrlichia Canina** e **Leishmania** su campione sangue intero, siero, o plasma.



Cod. TEST13

Temperatura di conservazione: 2-30 °C
Alto grado di accuratezza

* su ordinazione
Tempo previsto di attesa: circa 1 mese

FCoV Ag. - Kit 10 test * su ordinazione

RIF. RG 12-05

Per la determinazione qualitativa dell'antigene **Corona Felina** su campioni di feci.




Cod. TEST7

Alta sensibilità e specificità rispetto alla RT-PCR in tempo reale
Sensibilità: 92,8% - Specificità: 98,1%

FCoV Ab. - Kit 10 test * su ordinazione

RIF. RB 22-03

Per la determinazione qualitativa dell'anticorpo **Corona Felino** su campione sangue intero, siero, o plasma.

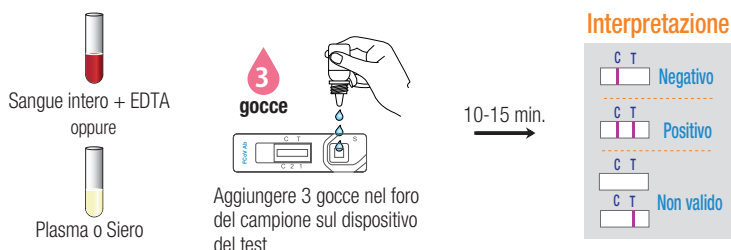


Cod. TEST8

Elevata sensibilità e specificità rispetto alla PCR
Sensibilità: 97% - Specificità: 98,5%

TOXOPLASMA Ab. - Kit 10 test * su ordinazione

RIF. RB 22-06

Per la determinazione qualitativa del **Toxoplasma** su sangue intero, plasma o siero felino.

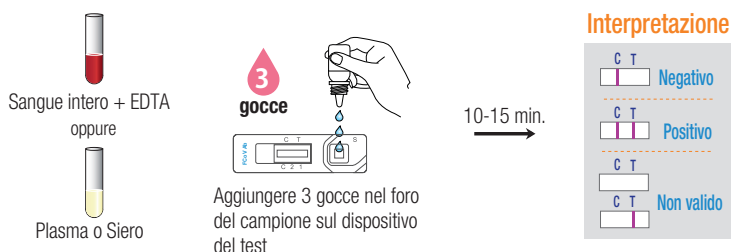

Cod. TEST12

Elevata sensibilità e specificità rispetto a ELISA
Sensibilità: 100% - Specificità: 98,7%

Filaria Felina FHV (Ag/Ab) - Kit 10 test * su ordinazione

RIF. RC 22-05

Per la determinazione qualitativa della **Filaria Felina** su campione sangue intero, siero, o plasma.



Cod. TEST15


Procedura di test in un'unica fase: rapida e precisa
Alta sensibilità e specificità

* su ordinazione

Tempo previsto di attesa: circa 1 mese

Gruppo sanguigno Canino DEA 1 - Kit 10 test


Test con principio immunocromatografico per la determinazione qualitativa su sangue intero del gruppo sanguigno canino DEA 1 che include DEA 1.1 - DEA 1.2 - DEA 1.3 - DEA 1.1-.

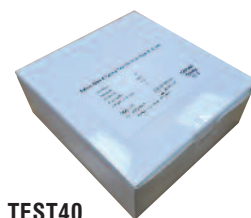

Cod. TEST40

Gruppo sanguigno Felino - Kit 10 test


Test con principio immunocromatografico per la determinazione qualitativa su sangue intero del gruppo sanguigno felino tipo A, B o AB.

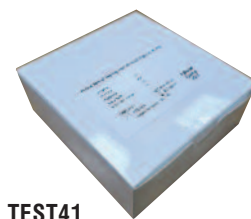

Cod. TEST41

Leptospirosi Ab test - Kit 5 test

Test con principio immunocromatografico per la determinazione qualitativa di anticorpi per Leptospirosi su siero/plasma/sangue intero (EDTA/eparina).

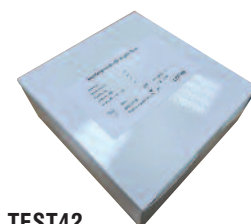

Cod. TEST42

RapidBac™ Vet 2.0

Test di screening per i batteri nelle urine.

Scegli l'antibiotico adeguato se l'infezione è Gram-positivo e/o Gram-negativo.



Sospetta infezione nelle vie urinarie

Animali domestici diabetici sottoposti a test batteriologici biennali

I pazienti che soffrono di sindrome di Cushing o di malattia renale cronica o qualsiasi paziente con poliuria


**QUANDO
UTILIZZARE
IL TEST?**

Nuovo test dopo il trattamento antibiotico "test-of-cure"

Cani con calcoli vescicali o tumori della vescica


Gatti affetti da cistite idiopatica felina

Interpretazione dei risultati

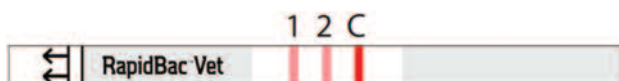


PRESENZA DI BATTERI GRAM -

(E. Coli, Klebsiella spp, Citrobacter spp, Enterobacter spp, e Serratia spp.)

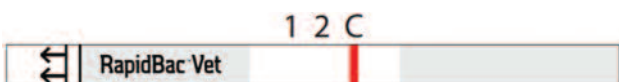

ASSENZA DI BATTERI

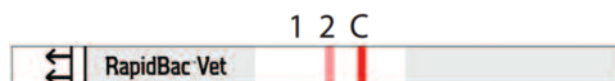

PRESENZA DI BATTERI GRAM +

(Staphylococcus spp, Enterococcus spp, Actinomyces spp, e Actinobaculum spp.)

GRAM -

(Morganella spp, Proteus spp, Providencia spp.)



Il valore della diagnostica

Servizi: Training operativi personalizzati,
remote service, super valutazione usato




Radiologia Digitale:

Dinamico - DR Flat Panel,
di eccellente qualità



Linea completa di test rapidi:
alta sensibilità e specificità

BIONOTE

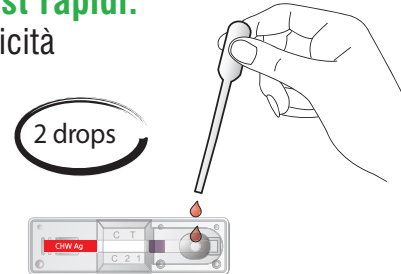

RapidBac™ Vet 2.0
test di screening
per i batteri nelle urine



Laboratorio Analisi:

Ematologia, chimica clinica, emogas, immunologia, coagulazione, elettroforesi, affidabilità e qualità a basso costo

ANALIZZATORE MORFOLOGICO MULTIFUNZIONALE



EMATOLOGIA



COAGULAZIONE



EMOGAS



MICROSCOPICO AWALIFE



CHIMICA CLINICA LIQUIDA



CHIMICA CLINICA SECCA



IMMUNOLOGIA



BIOLOGIA MOLECOLARE POC



URINE



GLUCOSIO E KETONI





Materiale di

Laboratorio, Chirurgia, Radiologia

Laboratorio

Centrifughe - Mixer

Cod. CENTRIFUGA5**Centrifuga modello CN45**

Centrifuga di laboratorio con rotore fisso, 12x10/75 ml - 8-15 ml

Velocità: 300 - 4500 rpm

Timer selezionabile: 30 sec. 99 min.

Sistemi di sicurezza: blocco sportello,

Eccesso di velocità

Dimensioni: (L) 265 x (W) 255 x (H) 140 mm

Display: (LCD)

Peso: 6 kg

**Cod. MIX1**

Agitatore ematologico modello BM-11

Dimensione: N. 4 rulli x 230 mm

**Cod. CENTRIFUGA AWA**

Centrifuga a rotore mobile orizzontale



Chirurgia

Concentratore di Ossigeno

Cod. OSSIGENO1**Mod. Philips EVER FLO**

Il concentratore di ossigeno EVER FLO produce ossigeno concentrato dall'aria circostante per pazienti che necessitano una terapia d'ossigeno a basso flusso.

L'ossigeno estratto dall'aria viene concentrato utilizzando un filtro molecolare e un procedimento di assorbimento a fluttuazione a pressione.

Rumorosità: 43 dbA / Flusso: da 0,5 a 5 lpm / Concentrazione: O2 93% (+/- 3%) a 5 lpm

OPI Alarm LOW O2 82% VERY LOW O2 70% / Dimensioni: A58-L38-P24 cm

Peso: 14 kg / Alimentazione: 230V monofase

**Cod. OSSIGENO2**

Filtro per concentratore di ossigeno

su richiesta

Disponibile fino ad esaurimento scorte

Cod. OSSIGENO3

Gorgogliatore

su richiesta

Radiologia

Abbigliamento Protettivo

Cod. COMM17

Camice piombato 0,50 misura 100x60 cm.

Cod. COMM14

Collare tiroide pb 0,5 mm.

Cod. COMM16

Guanti Anti RX palmari

Cod. COMM15

Occhiali Anti RX c/lenti Pb 0,75 mm



Accessori

Cod. COMM35

Segnalatore a bandiera

per un futuro ECOSOSTENIBILE

ISOMEDIC ha adottato un impegno significativo verso la sostenibilità ambientale. La nostra azienda è determinata a ridurre l'impatto sull'ambiente, perseguendo l'obiettivo ambizioso di raggiungere un bilancio zero delle emissioni di CO₂ e di promuovere un modello aziendale sostenibile.


Siamo orgogliosi di annunciare che il nostro contributo ha consentito di compensare ben 149,94 tonnellate di CO₂. Questa cifra, equivalente a 166 voli di sola andata da Roma a New York, rappresenta solo l'inizio del nostro impegno per proteggere l'ambiente.

Abbiamo piantato 2.664 alberi e generato 104,367 kWh di energia rinnovabile, equivalente a 29,82 abitazioni. Questi sforzi combinati sono un passo concreto verso la creazione di un ambiente più sano e sostenibile per tutti.

Le azioni di Isomedic riflettono il nostro impegno continuo verso la responsabilità ambientale. Ci impegniamo a integrare pratiche aziendali ecocompatibili in ogni fase delle nostre operazioni, sia che si tratti di **adottare trasporti a impatto zero, ottimizzare l'efficienza energetica o investire in fonti rinnovabili**.

Ogni mese aggiorniamo i dati sul nostro sito web www.isomedic.com. Per scoprire i progetti che sosteniamo e le aree del mondo in cui operiamo, basta scorrere fino in fondo alla home, cliccare su "Visualizza Progetti" e accedere alla Live Experience. Questa scelta di rendere tutto pubblico e facilmente accessibile dimostra il nostro impegno per una trasparenza totale.

Lavoriamo costantemente per espandere la portata di questi progetti e collaboriamo con **Green Future Project** per garantire un impatto positivo e duraturo. Il nostro obiettivo è non solo compensare le emissioni di CO₂, ma anche promuovere uno sviluppo sostenibile che beneficia sia dell'ambiente che delle persone che vi abitano.

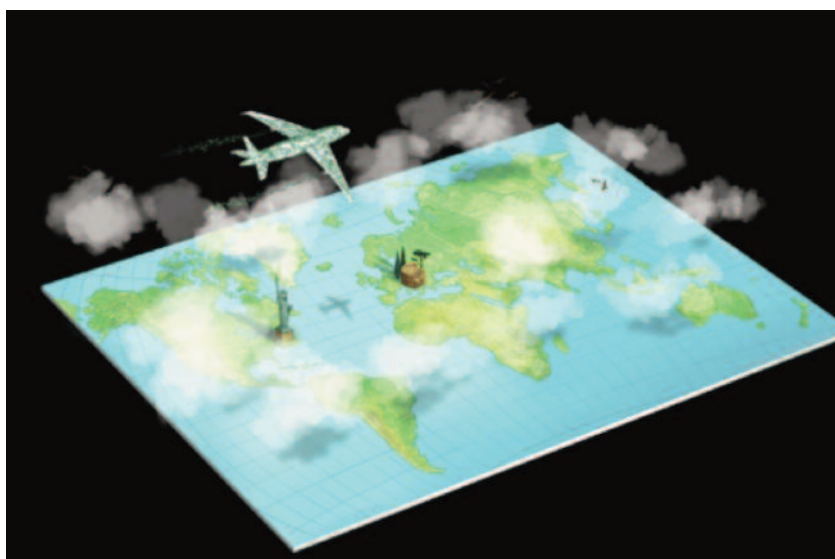

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

ORDINI

Ordine minimo fatturabile: Euro 100,00 (Iva esclusa)

IMBALLO

Al costo.

TRASPORTO / RISCHI DI TRASPORTO

A carico del committente. Resa franco nostra fabbrica. La merce viaggia a rischio pericolo del committente.

Le contestazioni per danni causati dal trasporto dovranno essere fatte al corriere al ricevimento della merce.

Per ordini inferiori ad euro 300,00 (iva esclusa) il committente si farà carico del costo totale della spedizione. Per ordini superiori ad euro 300,00 (iva esclusa) il committente pagherà una somma pari ad euro 5,00.

RECLAMI E RESI

Eventuali reclami sulla quantità del materiale inviato devono pervenire entro e non oltre 8 giorni lavorativi dalla data di consegna. Dopo tale termine la merce si intende accettata. Eventuali restituzioni dovranno essere concordate ed effettuate in porto franco.

CONTO VISIONE

La merce in conto visione deve essere resa o confermata entro e non oltre 10 giorni lavorativi dalla data di consegna.

*su ordinazione

Tempo previsto di attesa: circa 1 mese

PAGAMENTI

Le modalità di pagamento dovranno essere concordate e accettate al momento dell'ordine. In caso di pagamento con R.I.B.A. verranno applicate le spese di incasso pari ad euro 3,50 per scadenza.

Eventuali ritardi/insoluti comportano l'addebito degli interessi moratori al tasso bancario vigente.

I prezzi elencati in questo listino sono soggetti a IVA (22% esclusa).

Tutti i prezzi, i dati, le descrizioni esposti nel presente listino possono essere variati o annullati in qualunque momento secondo le esigenze tecniche e commerciali della ditta produttrice e ciò senza obbligo di preavviso e senza possibilità di rivendicazione da parte dell'acquirente.

ISOMEDIC Srl declina ogni responsabilità per possibili inesattezze dovute ad errori di trascrizione o di stampa.

ISOMEDIC Srl si riserva di apportare senza preavviso tutte le modifiche che riterrà utili al miglioramento dei prodotti.

Le illustrazioni, i dati e le descrizioni contenuti in questo catalogo non sono quindi impegnativi ed hanno solo valore indicativo.

DEMO

Le DEMO degli strumenti GEM PREMIER e SPHERA saranno disponibili presso le strutture veterinarie al costo di 500,00 euro ciascuna.

Tuttavia, tale importo sarà detratto nel caso in cui si proceda all'acquisto dei suddetti strumenti.

Assistenza tecnica:

ombretta.poggi@isomedic.com

Tel. +39 0377.57.685

Richieste amministrative:

lorenzomattia.oliva@isomedic.com

sara.mallica@isomedic.com

Tel. +39 0377.57.685 int. 2

Cell. 335 5794935

Richieste di offerte:

ombretta.poggi@isomedic.com

Tel. +39 0377.57.685 int. 1

Inviare ordini a:

alessia.schilliro@isomedic.com

Tel. +39 0377.57.685 int. 3

È attivo un nuovo numero per ordini whatsapp: 338 819 0834




Note

[illegible]



I nostri partner

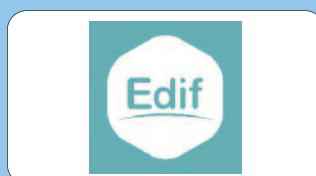

Sistemi diagnostici di radiologia e laboratorio

Assistenza tecnica:

info@isomedic.com
Tel. +39 0377.57.685

Amministrazione:

lorenzomattia.oliva@isomedic.com
sara.mallica@isomedic.com
Tel. +39 0377.57.685 int. 2

Richiesta di offerte:

ombretta.poggi@isomedic.com
info@isomedic.com
Tel. +39 0377.57.685 int. 1

Inviare ordini a:

alessia.schilliro@isomedic.com
info@isomedic.com
Tel. +39 0377.57.685 int. 3

È attivo un nuovo numero per
ordini WhatsApp: 338 819 0834



26867 SOMAGLIA (LO) - Via Po, 41 - Tel. +39 0377.57.685

www.isomedic.com